

Tutoriel complet d'utilisation de NeuronUP




GUIDE

CRÉER ET UTILISER UN PROFIL DE PATIENT



Nouveauté : choisir la dénomination : patient / élève / utilisateur


Avant de commencer, sachez que vous pouvez désormais décider de la manière dont la plateforme nommera les personnes avec lesquels vous l'utilisez : patients / élèves / utilisateurs. Voici comment faire :

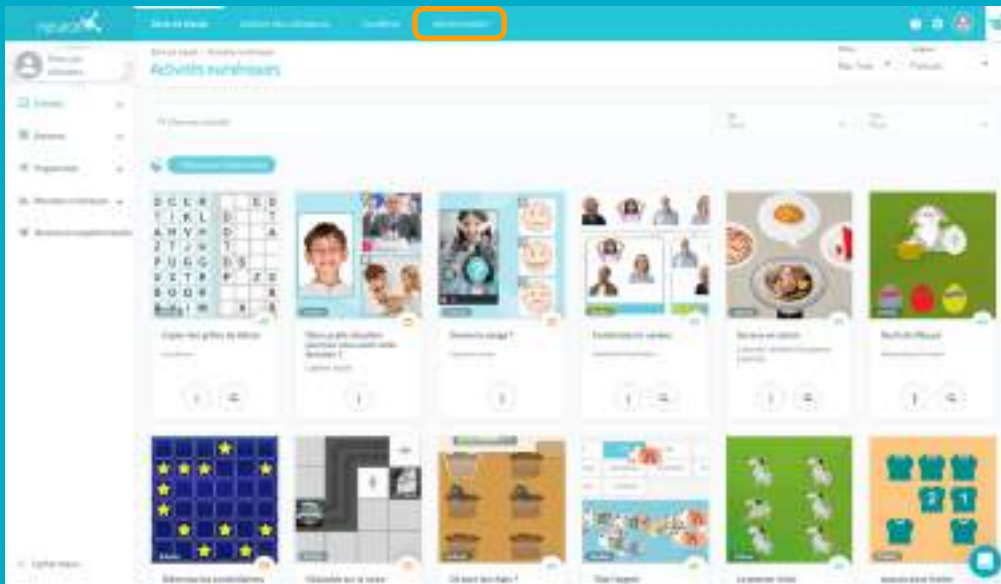

Allez dans l'onglet "Administration" sur la partie haute de votre écran.



Puis dans "Centre/Entreprise" cliquez sur "Modifier" en haut à droite.

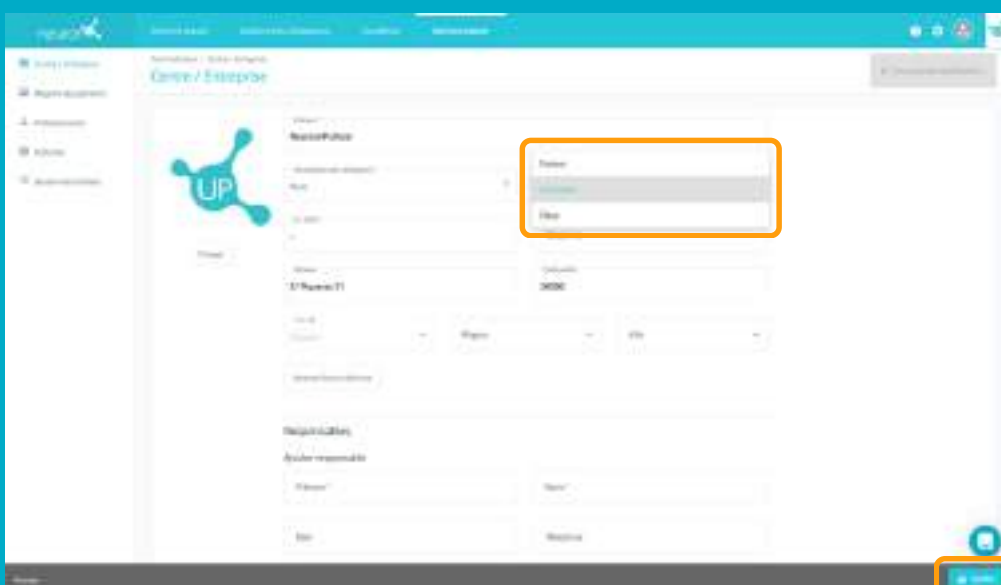


Cliquez sur "patient/utilisateur/élève" puis choisissez l'option que vous souhaitez.

N'oubliez pas de cliquer sur "Garder", en bas à droite.


Nous allons maintenant voir comment créer un profil de patient (nous utiliserons le terme "patient" pour ce tutoriel). Créer un profil de patient est essentiel : vous en aurez besoin pour assigner des sessions de travail et suivre les résultats de ces derniers.

1. Se rendre dans "gestion des patients"

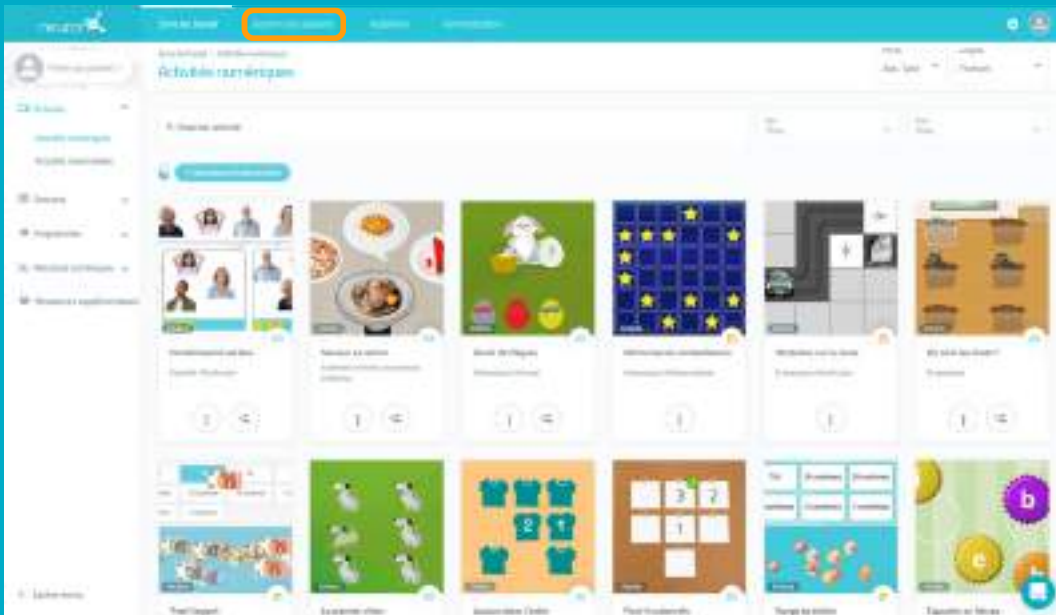

Pour commencer, cliquez sur l'onglet "Gestion des patients" qui se trouve sur la partie haute de votre écran.

2. Cliquer sur "Nouveau patient"

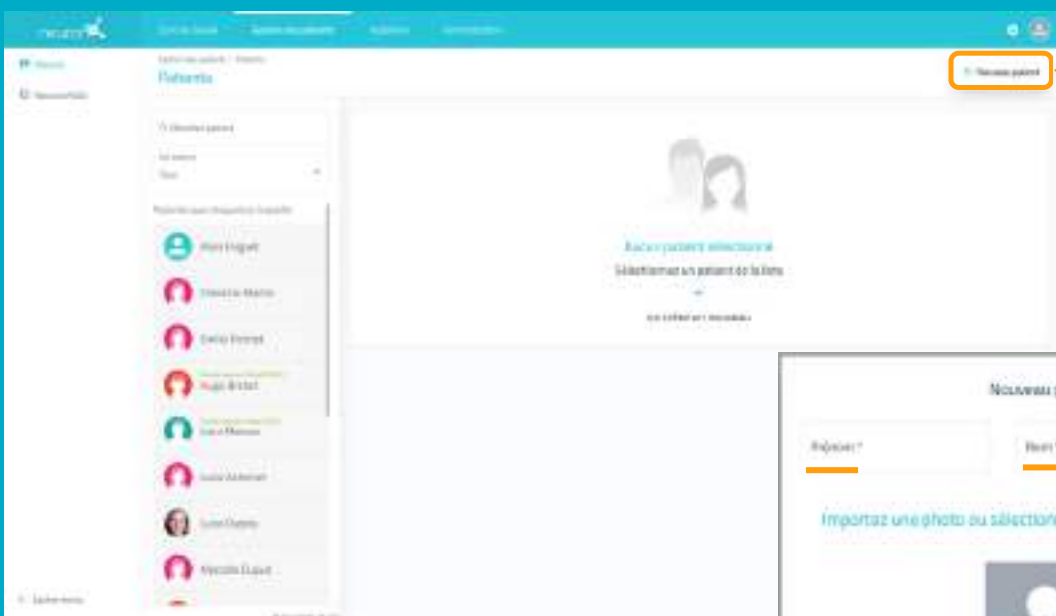


Cliquez sur "Nouveau patient".

Renseignez le **prénom** et le **nom** de votre patient, importez une **photo** de ce dernier ou choisissez un **avatar**, puis cliquez sur "Créer".


Si vous souhaitez créer un profil pour du **travail de groupe**, écrivez par exemple "groupe" dans prénom et un numéro dans nom. Ex : groupe 2.

**Voir la partie 'travailler en groupe'.*

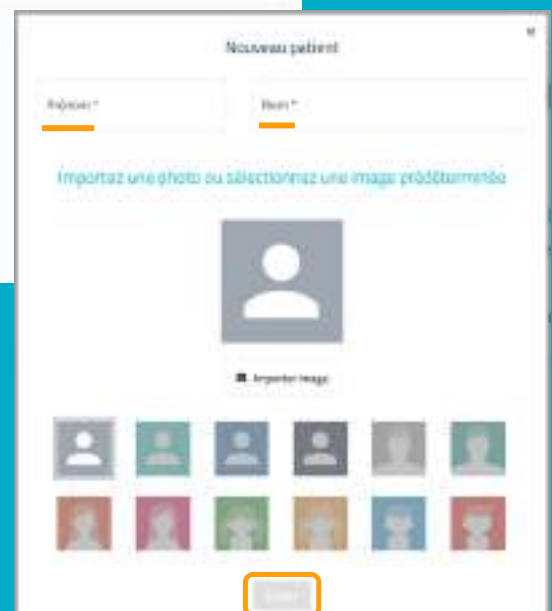

3. Remplir le profil du patient

Cliquer sur "Modifier"

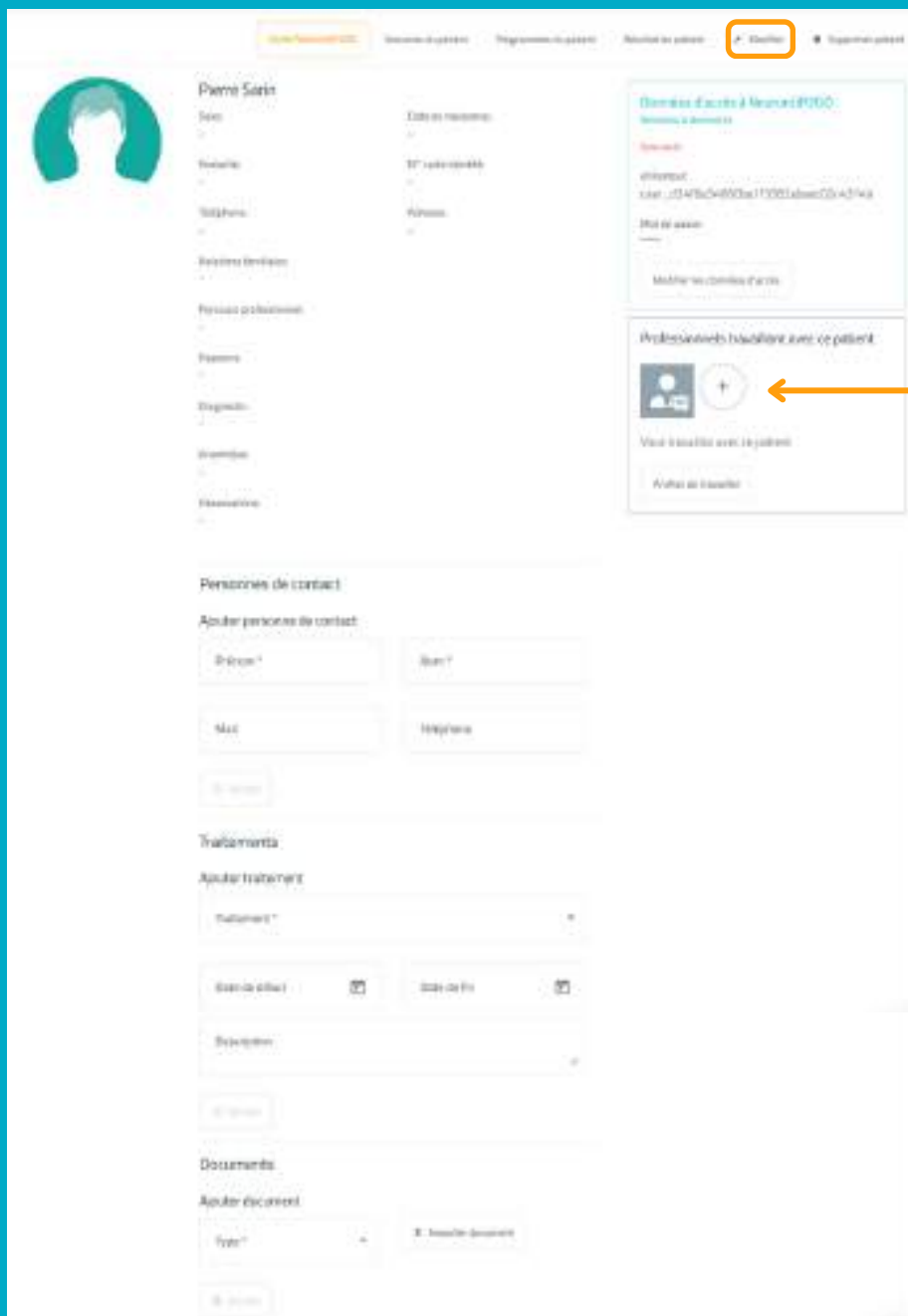

Une fois le profil de votre patient créé, vous pouvez y ajouter toutes les **informations** que vous souhaitez.


Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur "**Modifier**".

Vous pouvez également définir qui sont les professionnels qui travaillent avec ce patient, c'est notamment utile lorsque vous êtes plusieurs collègues à utiliser NeuronUP.

Depuis cet écran, vous pouvez aussi **gérer les données d'accès à NeuronUP2GO** (accès à distance), dans l'encart bleu.

**Voir le tutoriel 'Utiliser NeuronUP2GO'.*

4. Consulter le travail prévu pour le patient et ses résultats

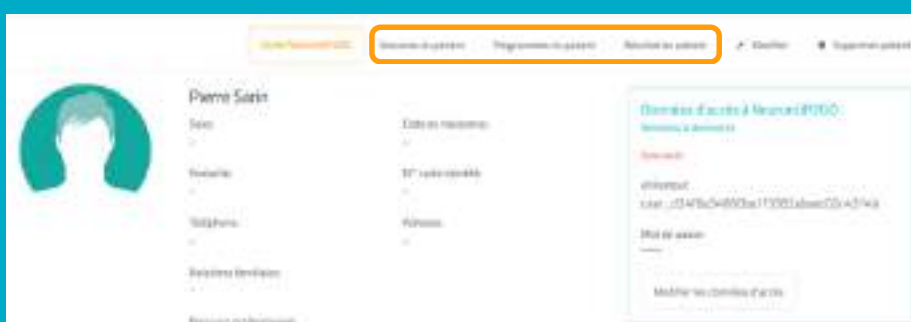

Depuis le profil de votre patient, vous pouvez accéder à ses sessions ou programmes ainsi qu'à ses résultats.

GUIDE

PERSONNALISER
LES ACTIVITÉS NEURONUP





Sur NeuronUP, vous pouvez **personnaliser les jeux et les générateurs**, les fiches ne sont en revanche pas personnalisables.

1. Choisissez et ouvrez une activité (jeu ou générateur)



Choisissez un jeu ou un générateur depuis la page principale de NeuronUP.

Une fois l'activité ouverte, sélectionnez "**Modes personnalisés**".

2. Créez ou modifiez une personnalisation




- **Pour créer une nouvelle personnalisation** : entrez un nom pour cette dernière, par exemple le nom du patient à qui elle sera destinée.

Puis cliquez sur "Continuer".

- **Pour modifier une personnalisation**, cliquez sur "éditer".

3. Commencez la personnalisation

Aspects généraux

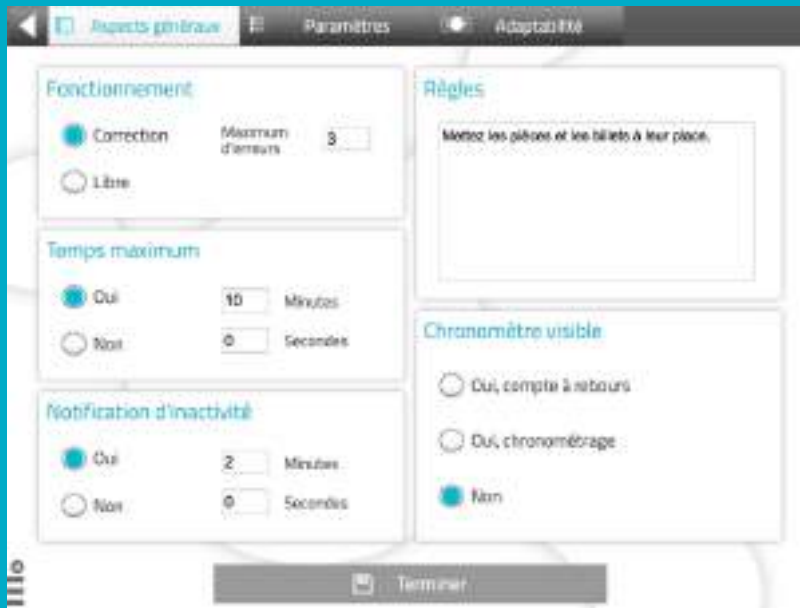

Les différents "aspects généraux" sont les mêmes pour chaque activité (jeux, générateurs).

Vous pourrez choisir le mode de travail, adapter le temps, avertir le patient lorsqu'il est inactif, adapter les règles et ajouter un chronomètre.

Paramètres



Les "paramètres", eux, sont propres à chaque activité.

Dans le cas présent, nous sommes sur une activité de manipulation d'argent, vous pourrez donc choisir le type de monnaie, le nombre de billets/pièces ainsi que leur valeur.

Adaptabilité



L'onglet "adaptabilité" n'est pas disponible sur toutes les activités.

Dans le cas présent, il vous permet de choisir entre faire glisser ou cliquer sur les éléments pour faciliter la tâche des patients avec des troubles moteurs ou peu habiles avec la souris ou les écrans tactiles.

4. Enregistrez la personnalisation



Vous pouvez ajouter une description à la personnalisation.

Ainsi, vous pourrez vous souvenir plus facilement de ses caractéristiques.

Pour **enregistrer** la personnalisation, cliquez sur "Ajouter".

L'activité personnalisée et prête et sauvegardée




Vous pourrez **travailler directement** avec l'activité personnalisée ou la **retrouver dans la liste des personnalisations** de l'activité pour travailler avec plus tard.




Retrouvez votre personnalisation lorsque vous créez une session

Allez dans sessions > sessions numériques > nouvelle session numérique.

Configurez votre session et ajoutez les activités, choisissez l'activité pour laquelle vous avez créé une personnalisation. Dans le cas présent "Triez l'argent".

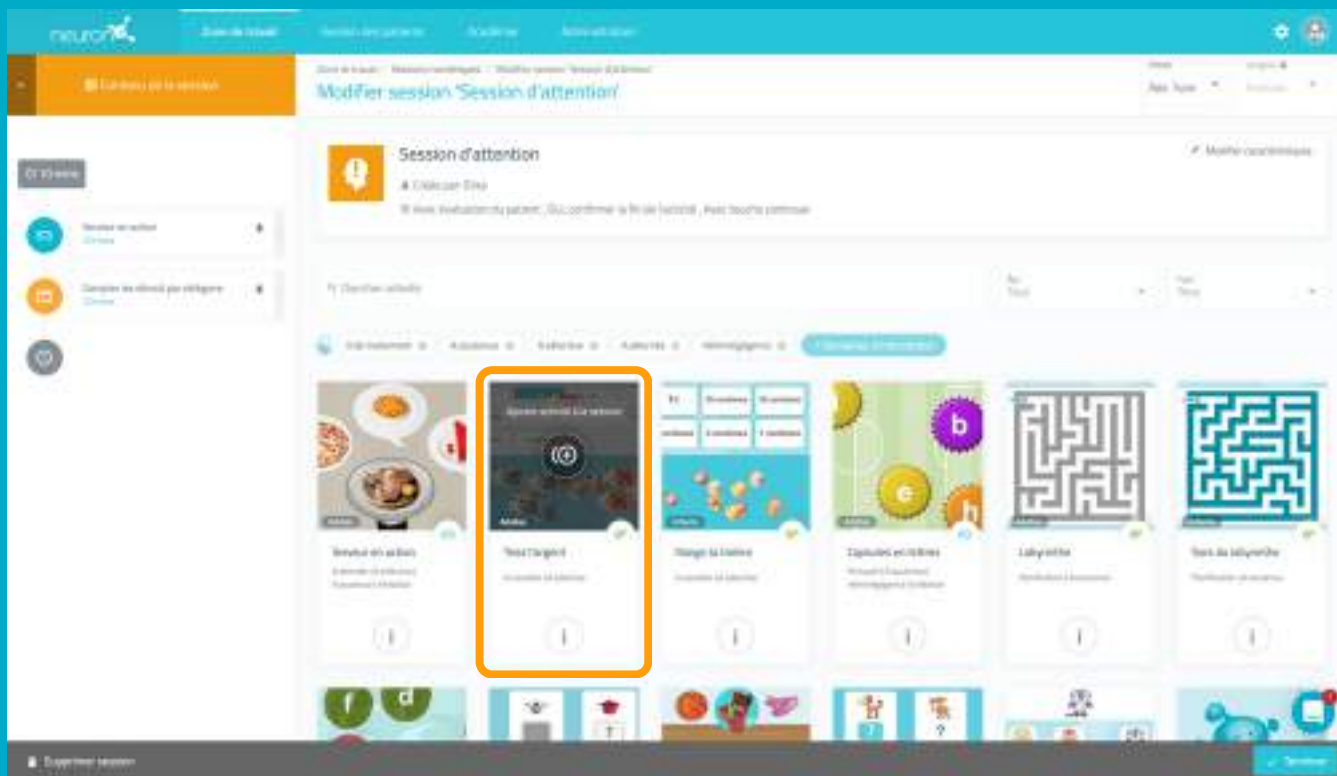

L'activité s'ajoute à la session, cliquez dessus sur la **partie gauche de l'écran** comme sur l'exemple. Ensuite, **activez le filtre 'choisir où commencer'** puis vous verrez apparaître les différentes personnalisations que vous avez créées de cette activité, **choisissez celle que vous souhaitez, ici 'Marie'**. Et voilà ! Votre patient fera sa session avec son activité personnalisée.

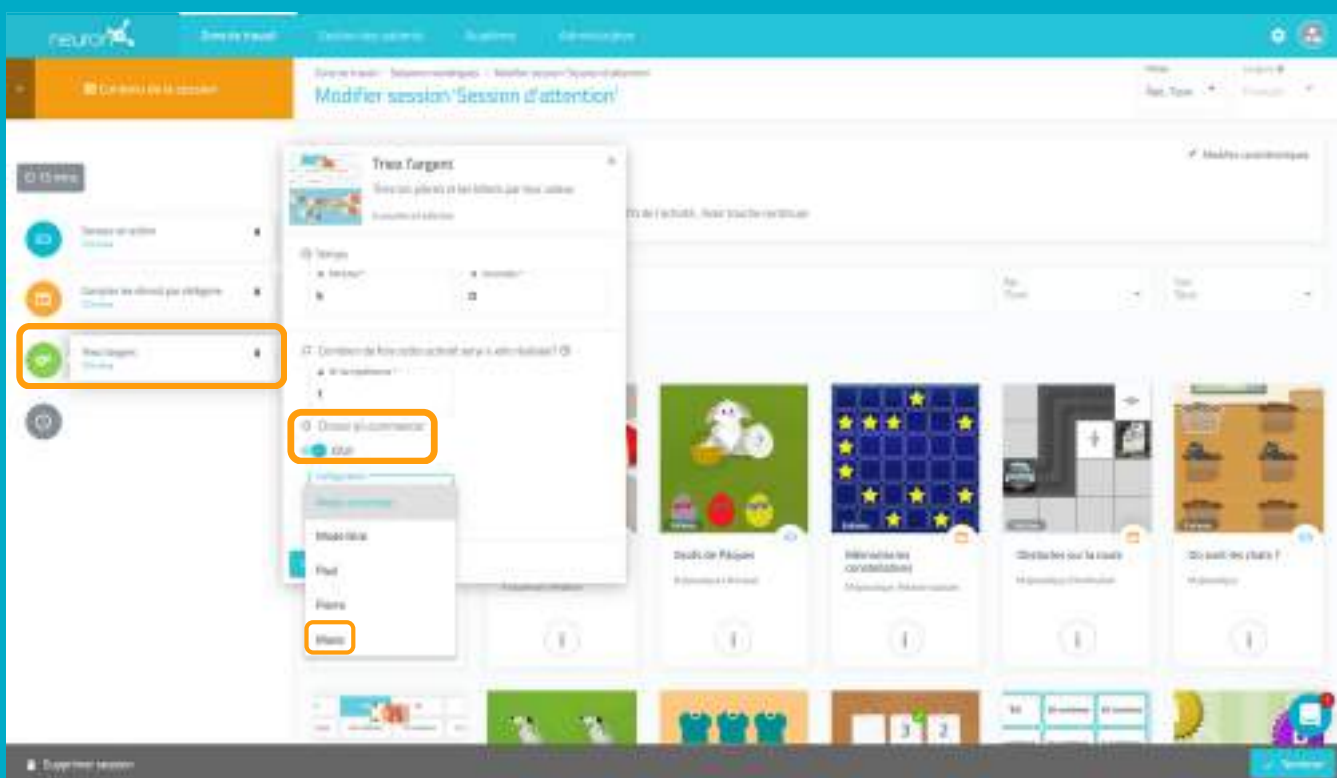


GUIDE

TRAVAILLER AVEC LES SESSIONS




Une session est un ensemble d'activités. Créer des sessions vous permet de planifier votre travail en quelques minutes. Découvrons comment faire ci-dessous.

1. Se rendre dans "Sessions numériques"

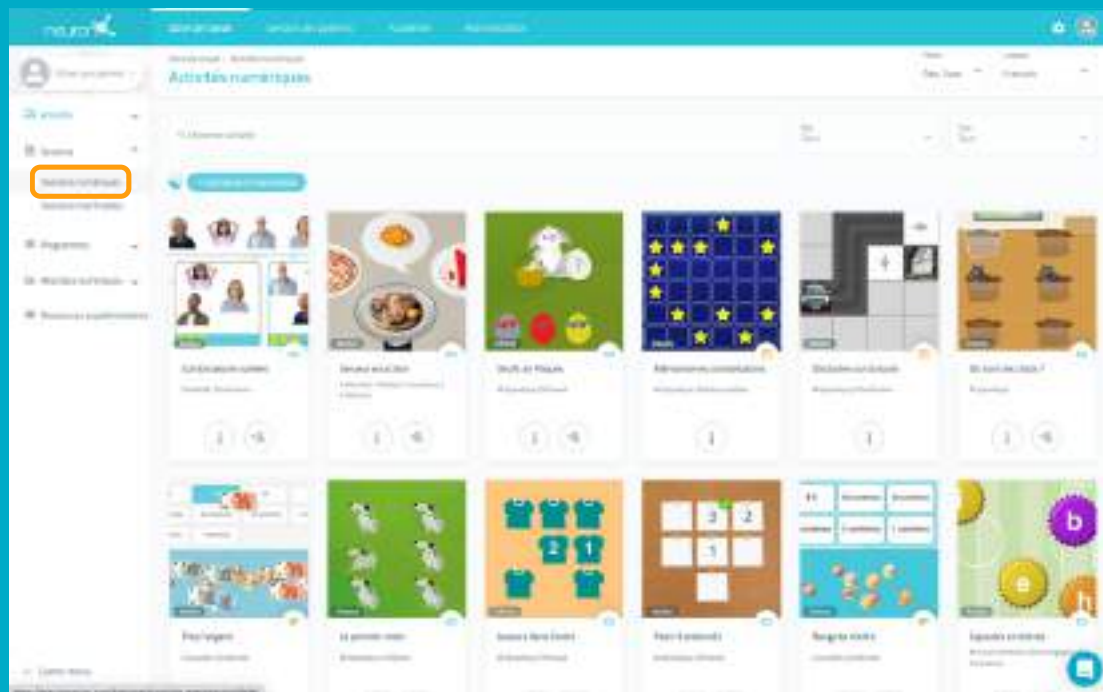

Pour commencer, cliquez sur "sessions" puis sur "session numériques" sur la partie gauche de votre écran.

2. Cliquer sur "Nouvelle session numérique"

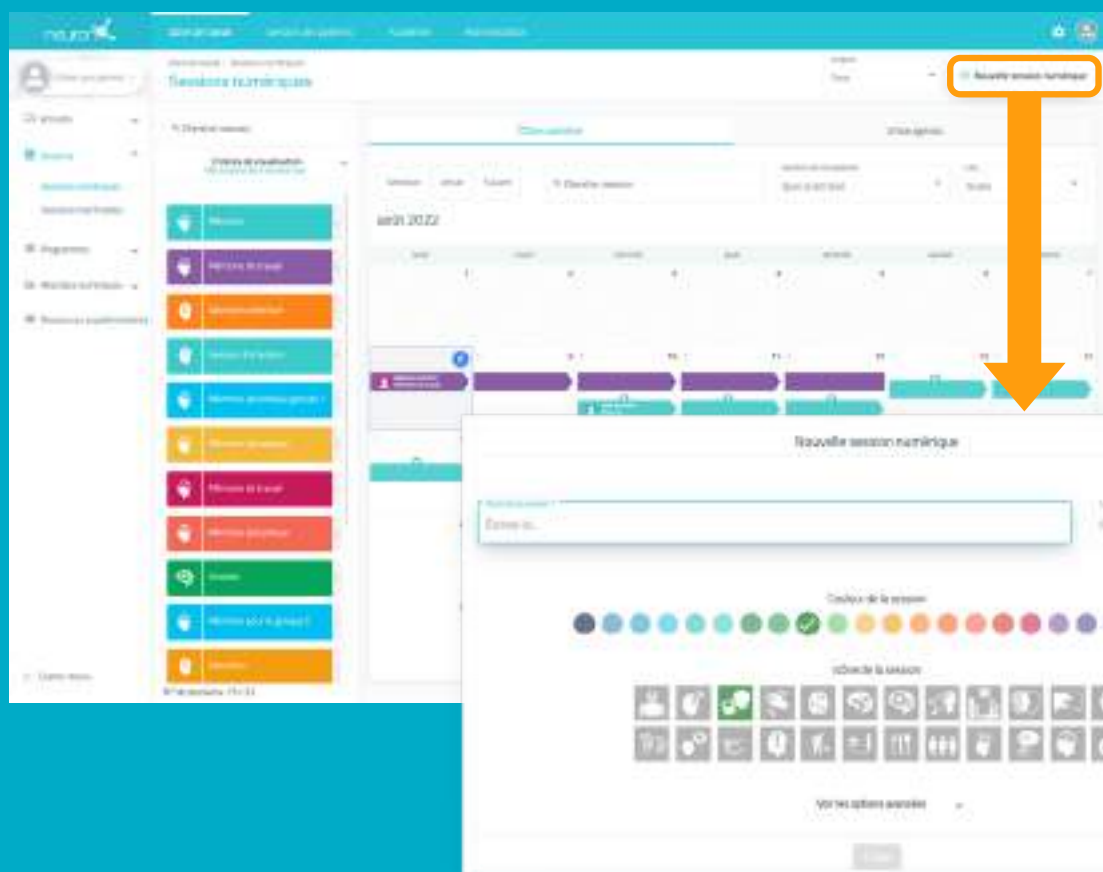

Une fois que vous aurez cliqué sur "Nouvelle session numérique", la fenêtre ci-dessous apparaîtra.

3. Remplir les informations de base de la session

Nouvelle session numérique

Nom de la session
Attention alternée et soutenue - Pierre

Langue
Français

Contrôle de la session

icône de la session

Cacher les options avancées

Thèmes
attention alternée attention soutenue Pierre

Description
Session pour Pierre avec pour objectif le travail de l'attention soutenue et alternée

Évaluation du patient OUI

Confirmer la fin de l'activité OUI

Suivre continue OUI

Créer

- Donnez un nom à votre session.
- Choisissez un icône et une couleur.

Optionnel :

- Cliquez sur "Options avancées".
- Ajoutez des **étiquettes**, cela vous aidera à retrouver votre session plus facilement.
- Ajoutez une **description** de la session.
- Activez ou désactivez les actions.

Cliquez sur "Créer".

4. Filtrer les activités

Neuro

Modifier session Attention alternée et soutenue - Pierre

Attention alternée et soutenue - Pierre

Activités

Filtrer


Activités disponibles

- Attention
- Mémoire
- Langage
- Planification
- Perceptif
- Perceptif visuel
- Perceptif auditif
- Perceptif tactile

La base de la session est créée, il faut maintenant y ajouter les activités que vous souhaitez.

Pour cela, vous pouvez filtrer les activités par fonctions cognitives, par type d'activités ou par âge.

5. Choisir les activités

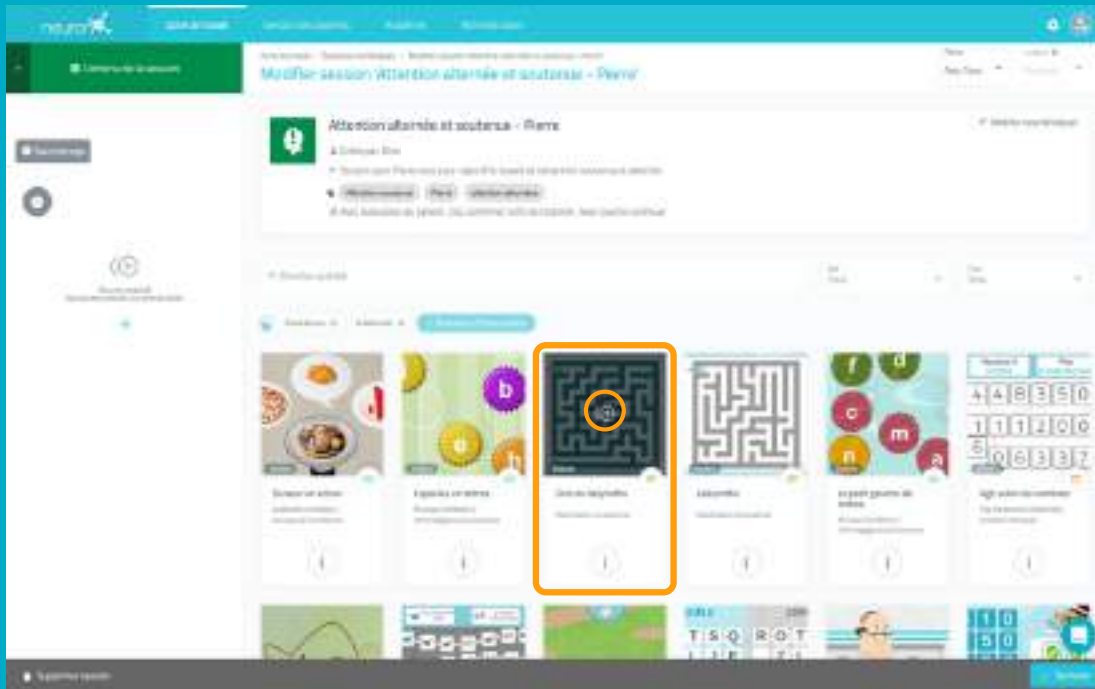


Une fois les activités filtrées, il vous suffit de **cliquer** sur celles que vous voulez ajouter à votre session.

Les activités sélectionnées apparaîtront sur la **partie gauche de l'écran** au fur et à mesure.

** Il est possible d'ajouter plusieurs fois la même activité.*

* Optionnel : Modifier l'ordre des activités

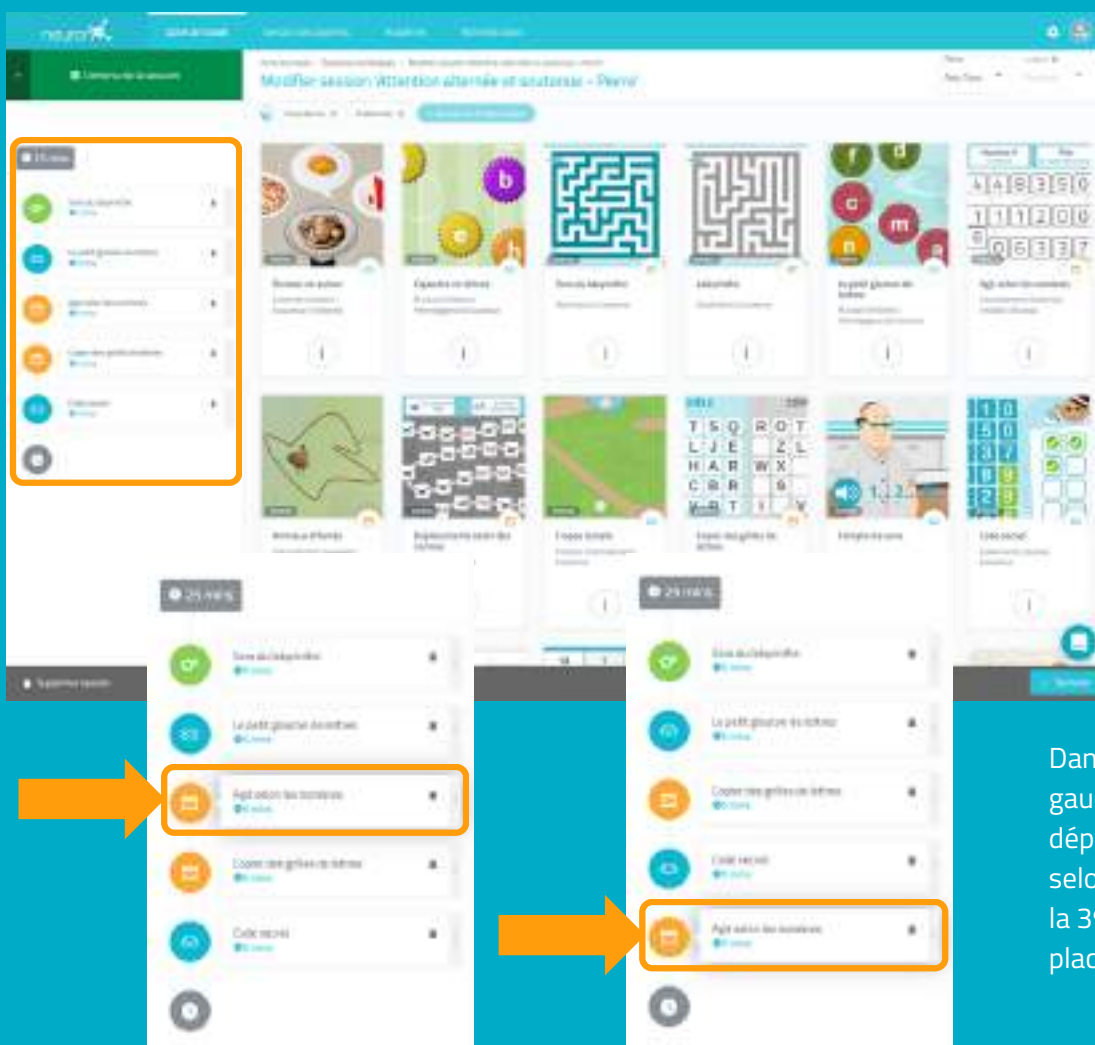

Vous pouvez modifier l'ordre des activités.



Il vous suffit de **maintenir le clic** sur l'activité et de la déplacer à l'endroit souhaité.

Dans l'exemple à gauche, nous avons déplacé l'activité "Agit selon les nombres" de la 3^e à la dernière place.

6. Configurer les activités (optionnel)

Par défaut, chaque activité durera 5 minutes et votre patient commencera au niveau auquel il s'était arrêté la dernière fois, ou au niveau le plus bas s'il n'a jamais travaillé avec l'activité en question. Pour configurer vous-même ces paramètres, il vous suffit de cliquer sur chaque activité et modifier les paramètres, comme nous vous le montrons ci-dessous.

Générateur

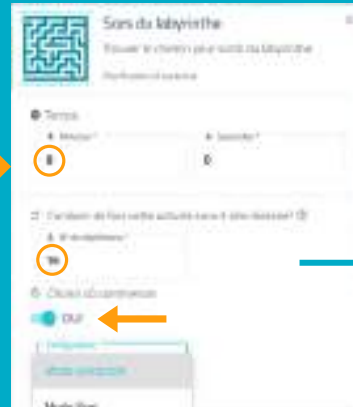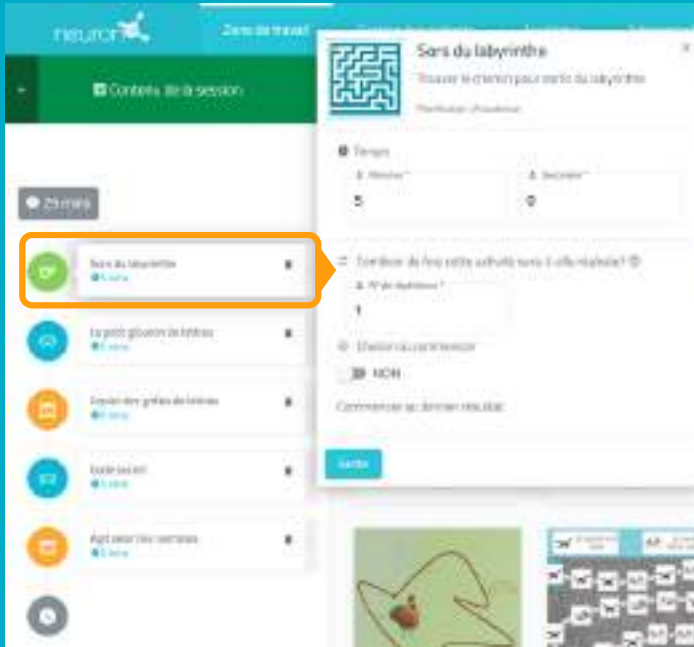


Définissez le temps de travail.

Cette activité est un générateur : adaptez le nombre de répétitions*.

Vous pouvez sélectionner la personnalisation créée au préalable pour Pierre.

**Dans le cas des générateurs, il est important d'augmenter le nombre de répétitions si vous voulez que votre patient travaille réellement 5 minutes (ou plus). Sinon, une fois que le patient aura terminé la répétition, il passera directement à l'activité suivante.*

Jeu

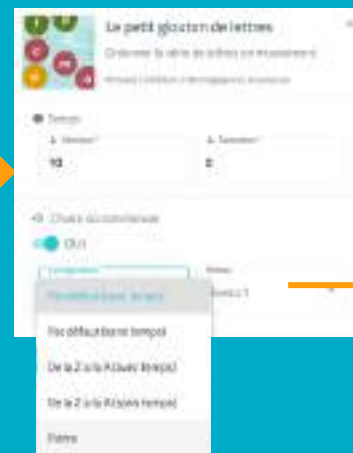

Pour les jeux, la démarche est similaire.

La différence est que vous pouvez déterminer le niveau auquel le patient débutera.

Fiche




Pour les fiches, la démarche est identique à celle des jeux.

La différence est que vous ne pouvez pas choisir de personnalisation, car il n'est pas possible de personnaliser une fiche.

N'oubliez pas de sauvegarder pour chaque activité.


7. Enregistrer la session

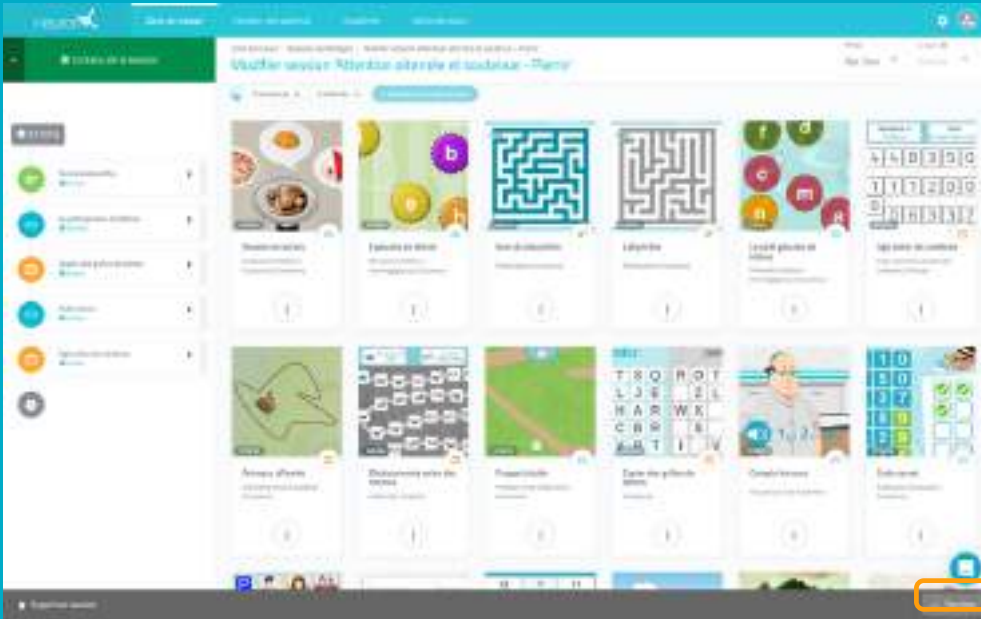


Une fois votre session configurée, cliquez en bas à droite sur "Terminer" pour enregistrer la session.

(Vous pourrez la modifier par la suite si besoin).

8. Assigner la session

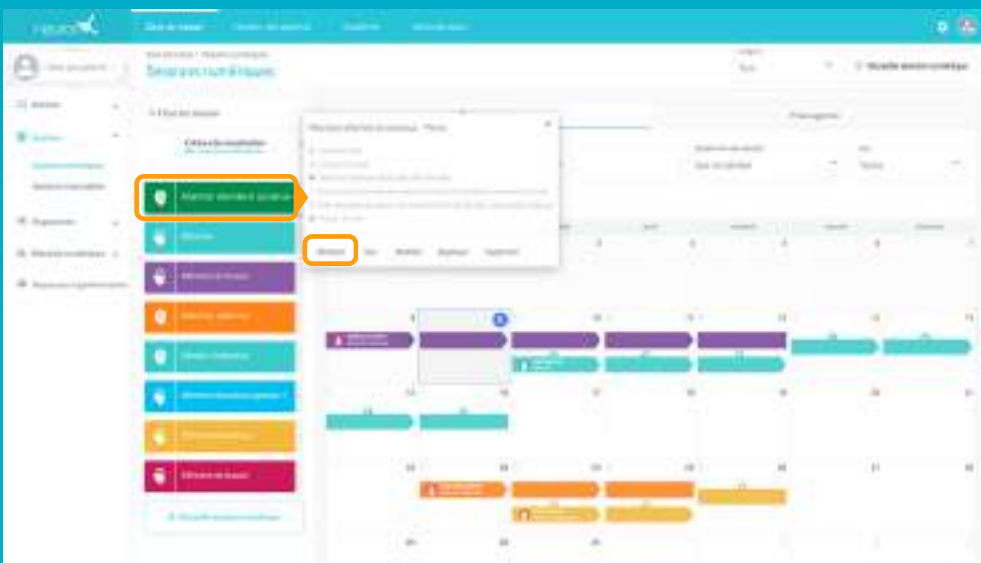

Cliquez sur la session ou faite la glisser à la date souhaitée.

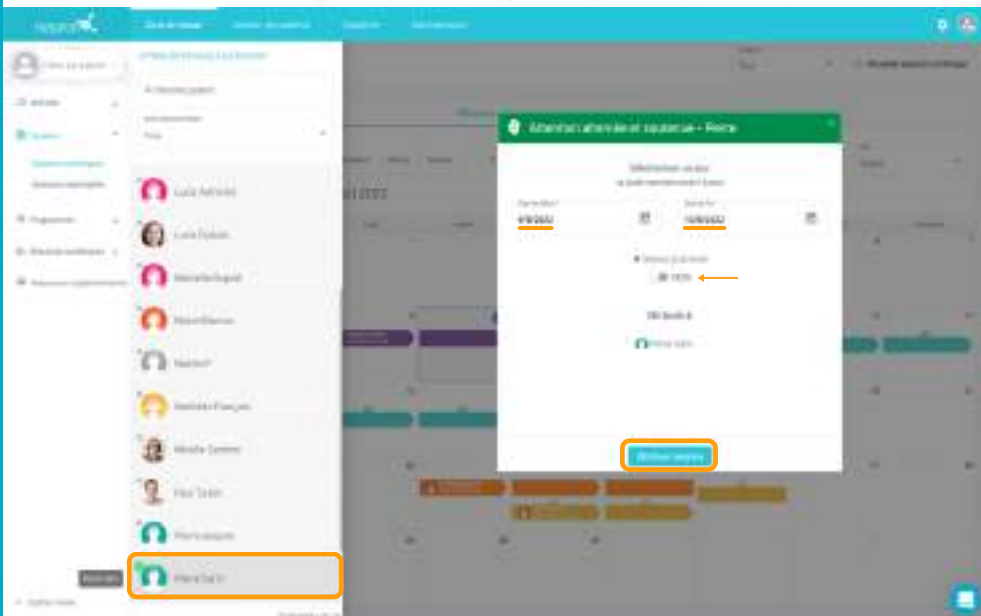

Sélectionnez un ou plusieurs **patients** à qui assigner la session.*


*Voir tutoriel 'travailler avec plusieurs patients simultanément'.

Définissez la date de début et la **date** de fin pour faire la session.

Activez le filtre **session à domicile** si vous voulez que votre patient travaille à distance.*

*Voir tutoriel travailler avec NeuronUP2GO.

9. Démarrer la session

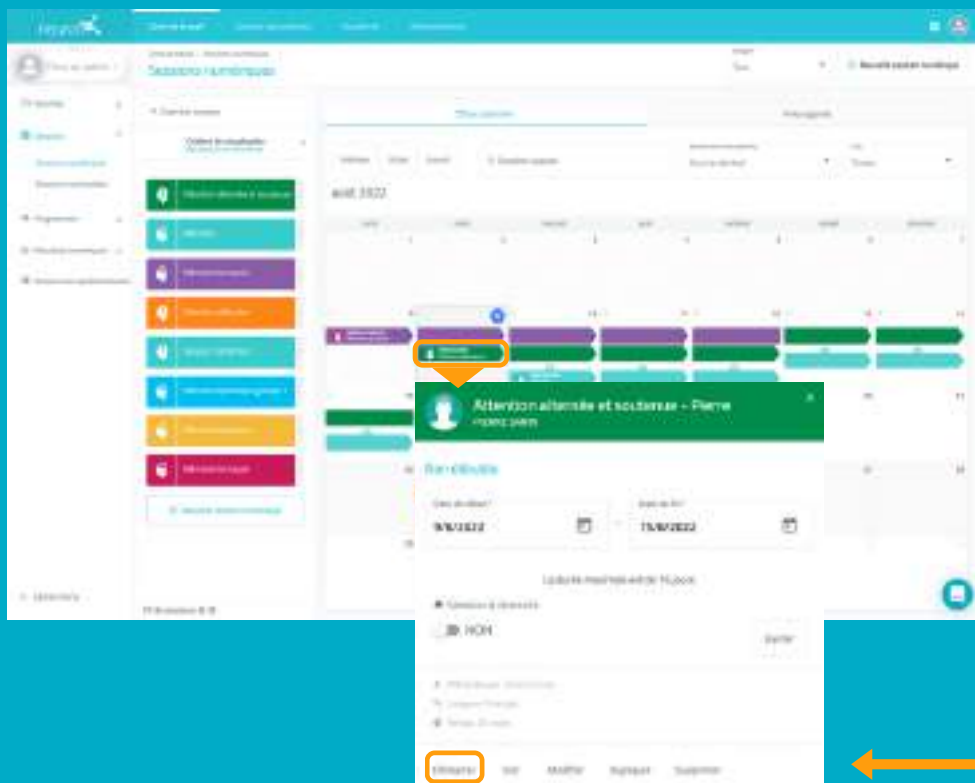

Pour démarrer une session, il faut obligatoirement qu'elle soit attribuée et que nous nous trouvions dans la plage de dates de cette dernière.
(Comme sur l'exemple)



Ci c'est le cas, cliquez sur "Démarrer".

10. Suivez l'avancée de la session



Une fois la session démarrée, vous pourrez suivre son évolution grâce à l'apparition d'une jauge.

Vue calendrier / Vue agenda

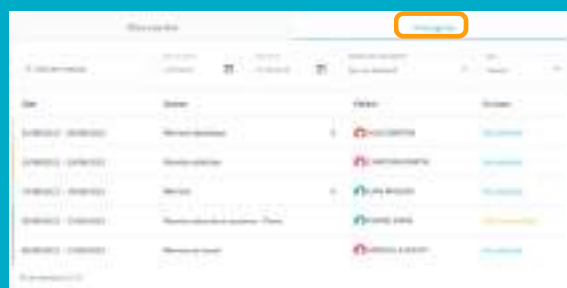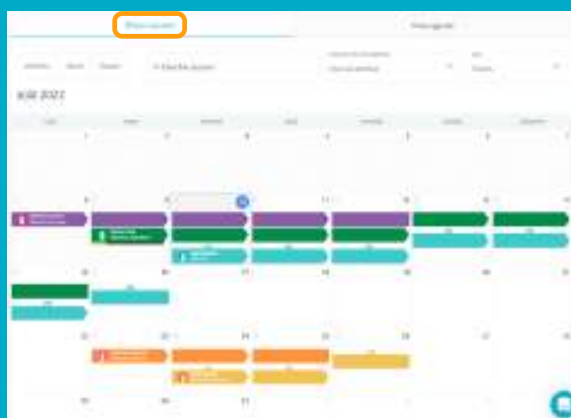

Vous pouvez voir et organiser vos sessions avec la vue calendrier (à gauche) ou avec la vue agenda (à droite).


GUIDE

TRAVAILLER AVEC LES PROGRAMMES




Un programme est un ensemble de sessions. Créer des programmes vous permet de planifier votre travail sur plusieurs mois, en quelques minutes. Découvrons comment faire ci-dessous.

1. Se rendre dans "Programmes numériques"

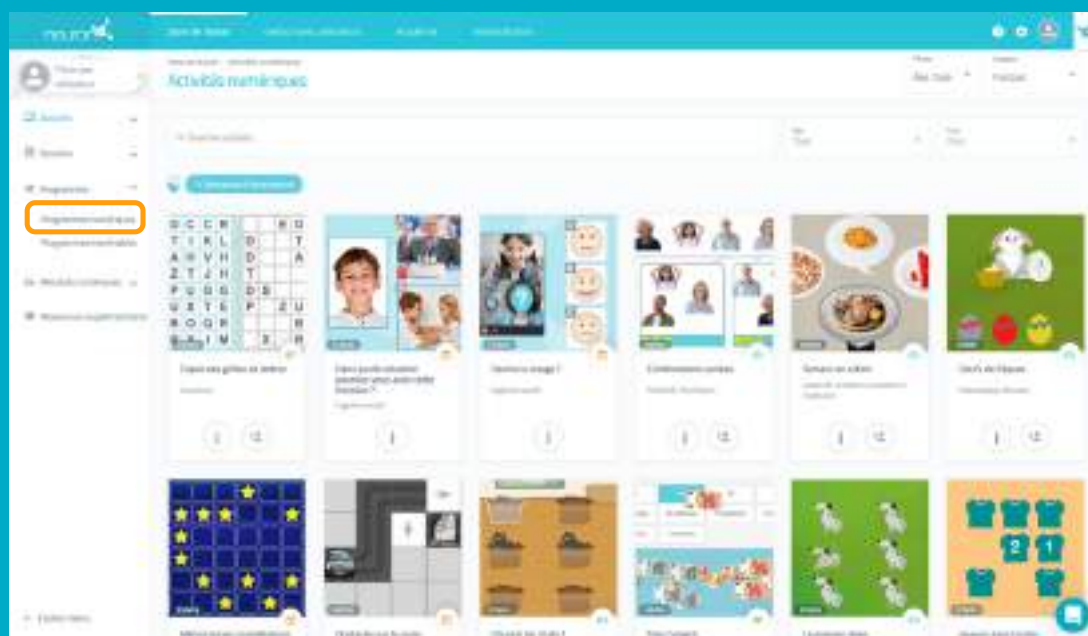


Pour commencer, cliquez sur "programmes" puis sur "programmes numériques" sur la partie gauche de votre écran.

2. Cliquer sur "Nouveau programme numérique"

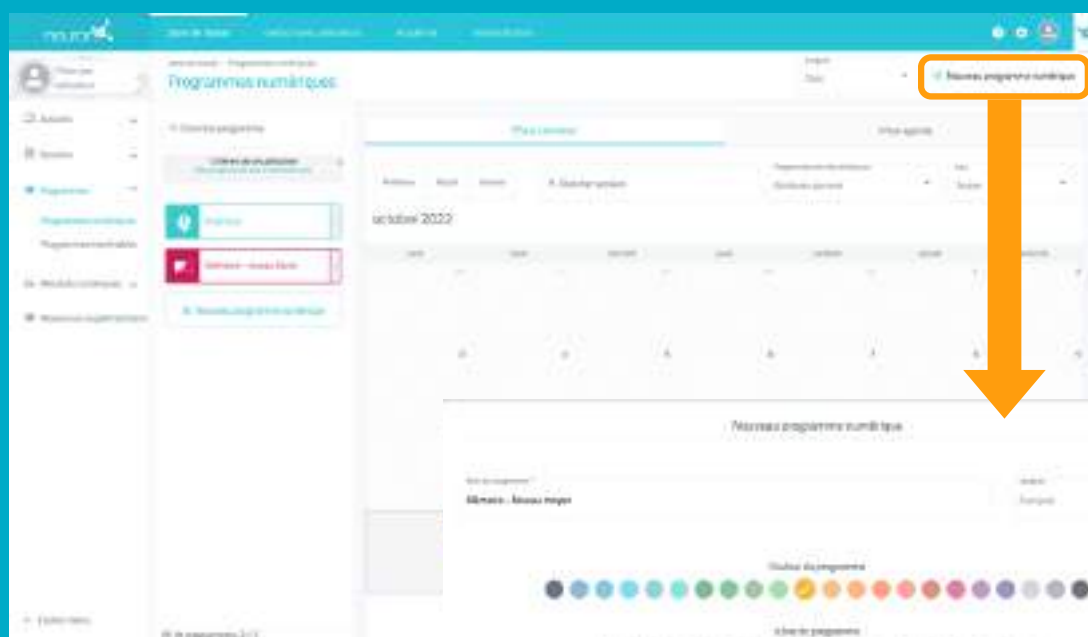

Une fois que vous aurez cliqué sur "Nouveau programme numérique", la fenêtre ci-dessous apparaîtra.

3. Remplir les informations de base du programme

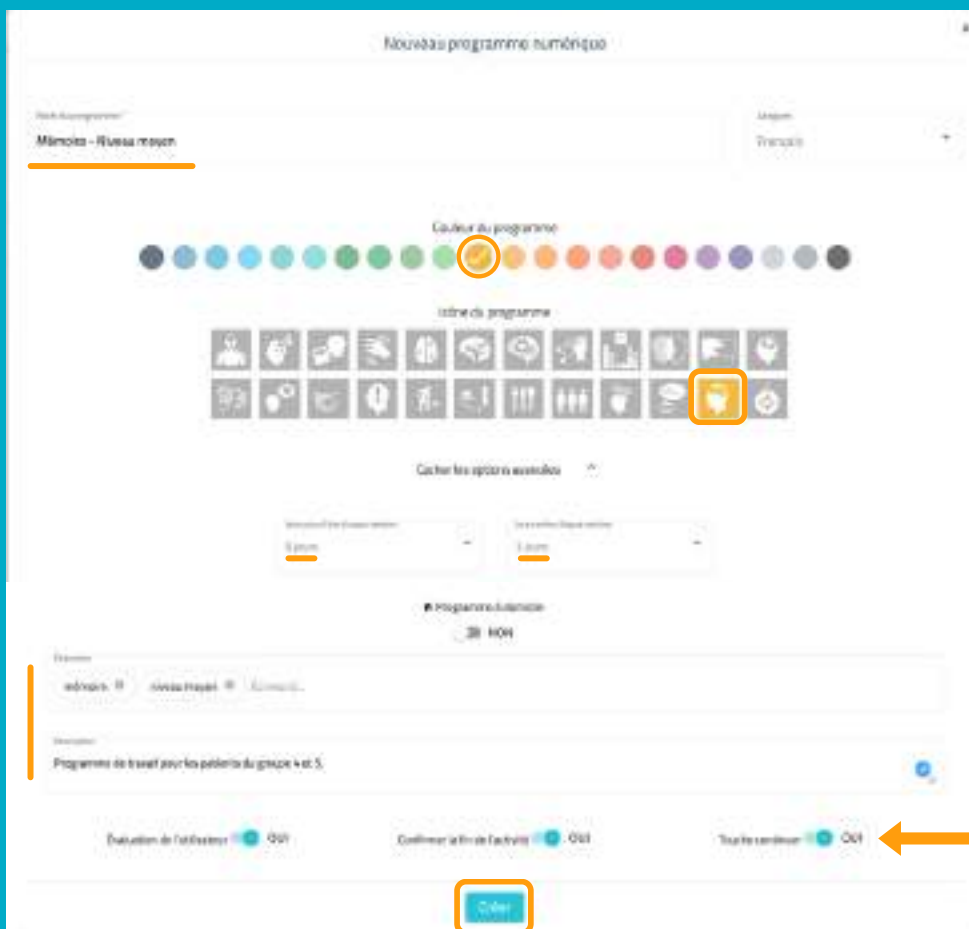


- Donnez un nom à votre programme
- Choisissez un icône et une couleur

Optionnel :


- Cliquez sur "Options avancées"
- Déterminer le nombre de **jours** que votre patient aura pour faire chaque session et le nombre de jours de repos entre chacune d'entre-elles.
- Ajoutez des **étiquettes**, cela vous aidera à retrouver votre programme plus facilement
- Ajoutez une **description**
- Activez ou désactivez les actions.

4. Ajouter les sessions de votre choix

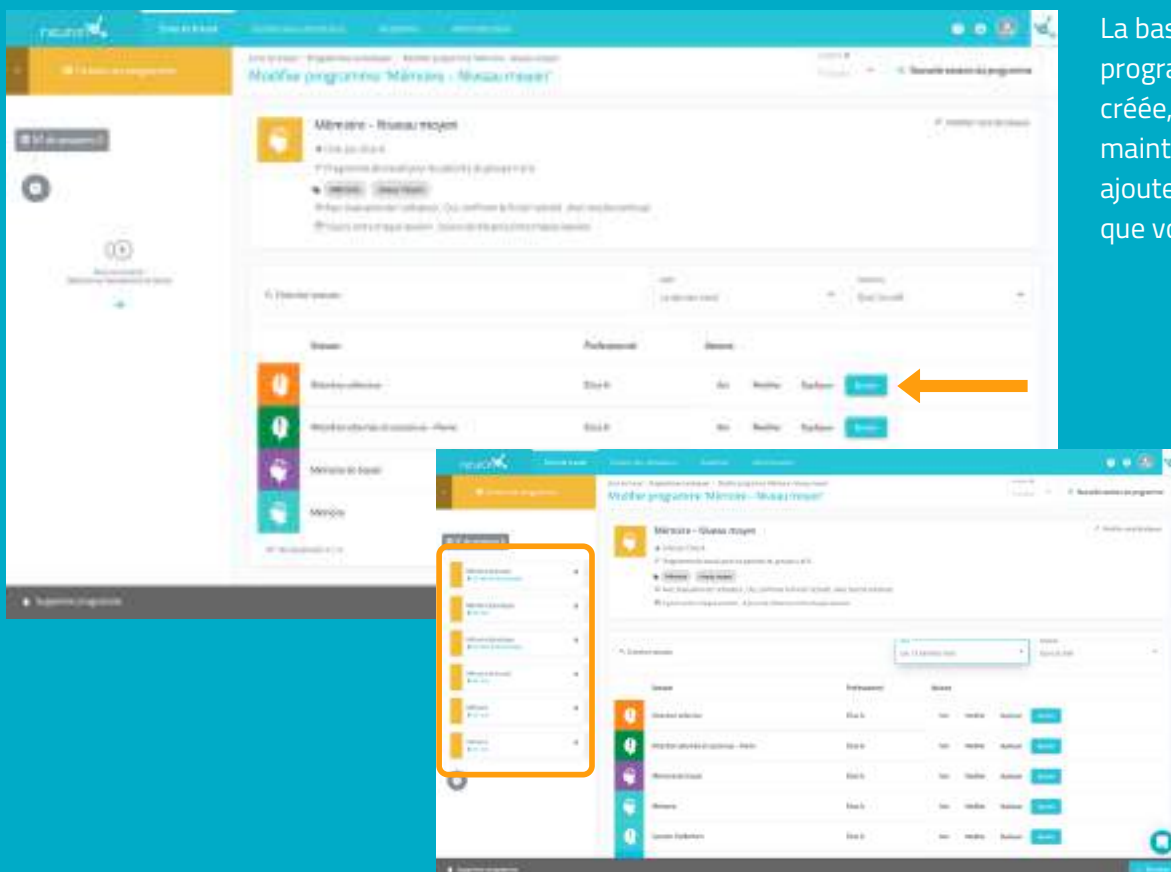

La base du programme est créée, il faut maintenant y ajouter les sessions que vous souhaitez.


5. Enregistrer le programme

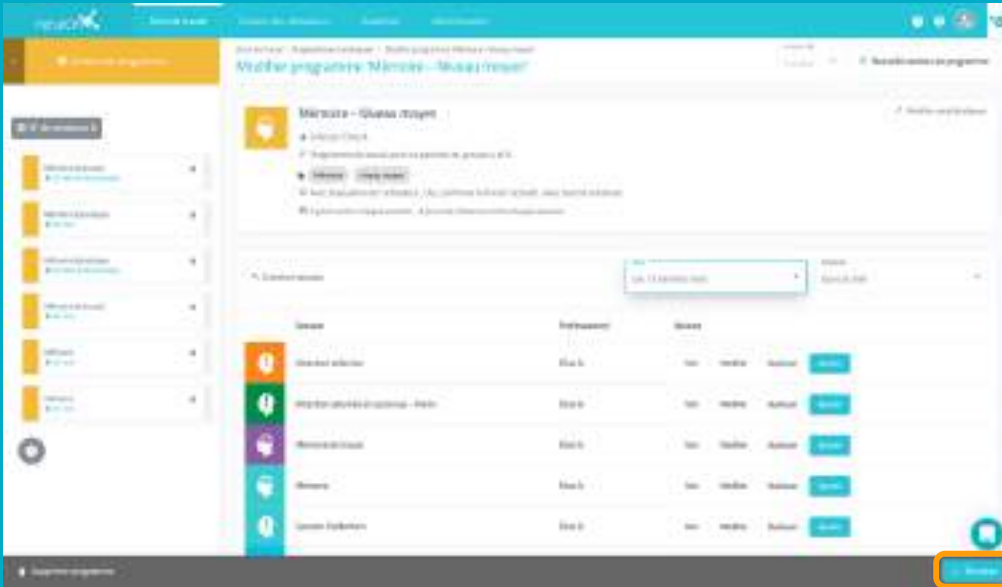


Une fois votre programme configuré, cliquez en bas à droite sur "Terminer" pour l'enregistrer.

(Vous pourrez le modifier par la suite si besoin)

6. Assigner le programme

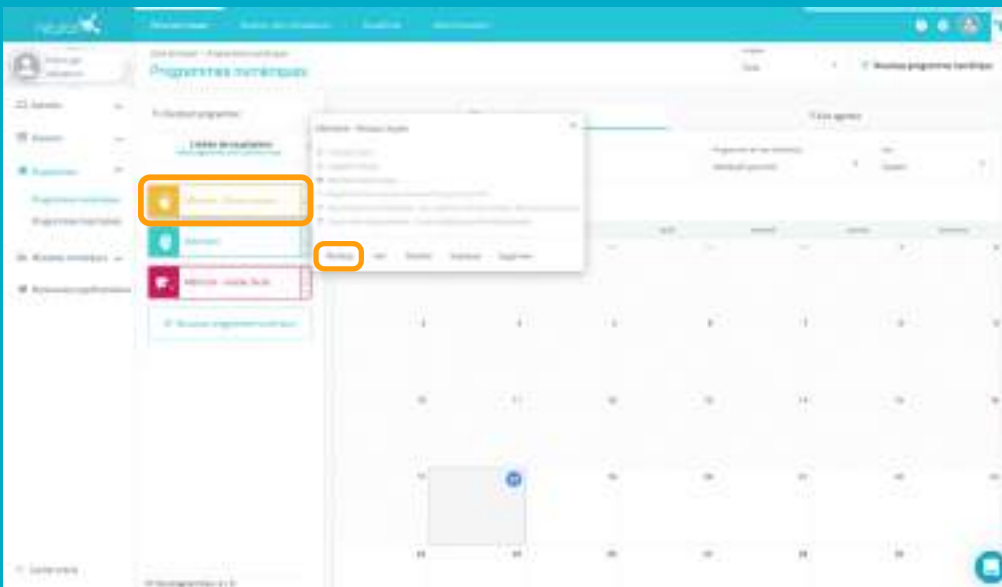

Cliquez sur le programme ou faite le glisser à la date souhaitée.

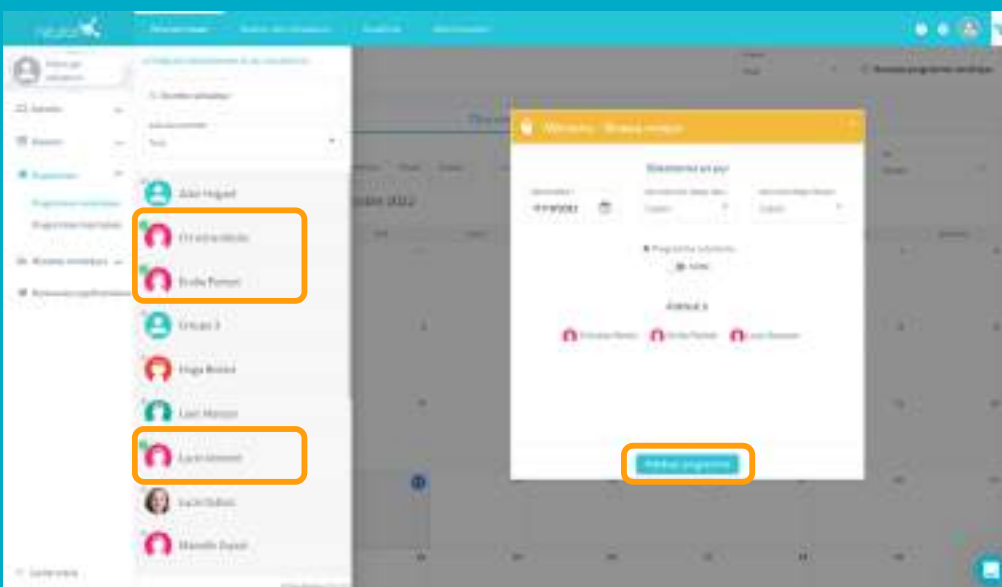


Sélectionnez un ou plusieurs **patients** à qui assigner le programme.*

** Voir tutoriel 'différentes manières de travailler avec NeuroNUP'*

Activez le filtre **session à domicile** si vous voulez que votre patient travaille à distance.*

** Voir tutoriel NeuronUP2GO*

7. Démarrer le programme

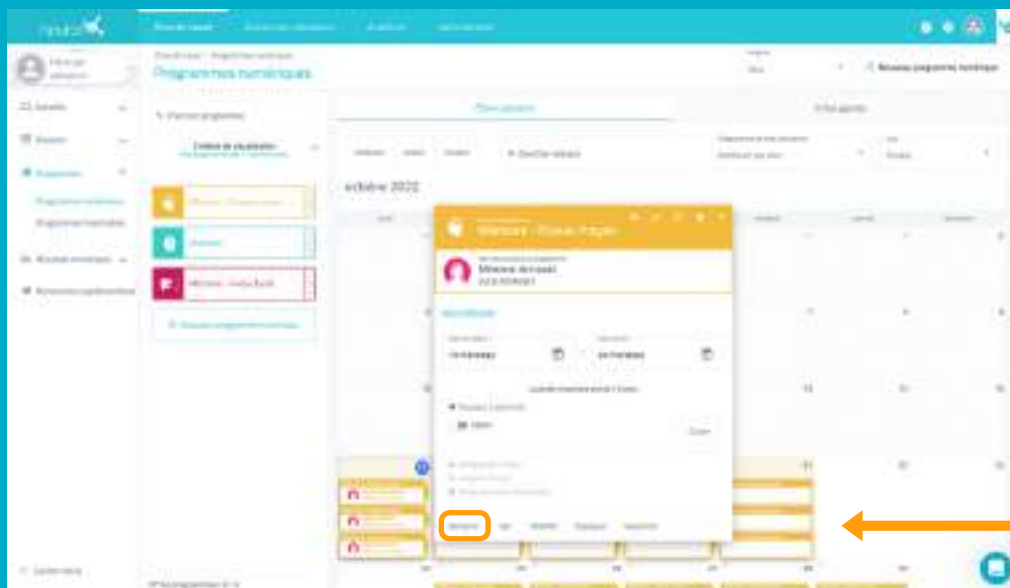

Pour démarrer un programme il faut obligatoirement qu'il soit attribué et que nous nous trouvions dans la plage de dates de ce dernier. (Comme sur l'exemple)


Ci c'est le cas, cliquez sur "Démarrer"

8. Suivez l'avancée du programme



Une fois le programme démarré, vous pourrez suivre son évolution grâce à l'apparition d'une jauge.

Vue calendrier / Vue agenda

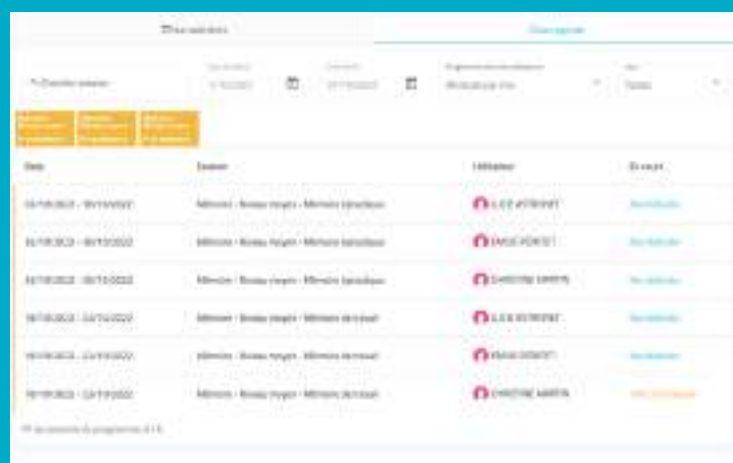

Vous pouvez voir et organiser vos programmes avec la vue calendrier (à gauche) ou avec la vue agenda (à droite).



GUIDE D'UTILISATION DE NEURONUP2GO (ACCÈS À DISTANCE)




1. Créez un patient

"Gestion des patients" > "Nouveau patient"



2. Créez-lui des accès NeuroNUP2GO

"Profil patient" > "Modifier les données d'accès"

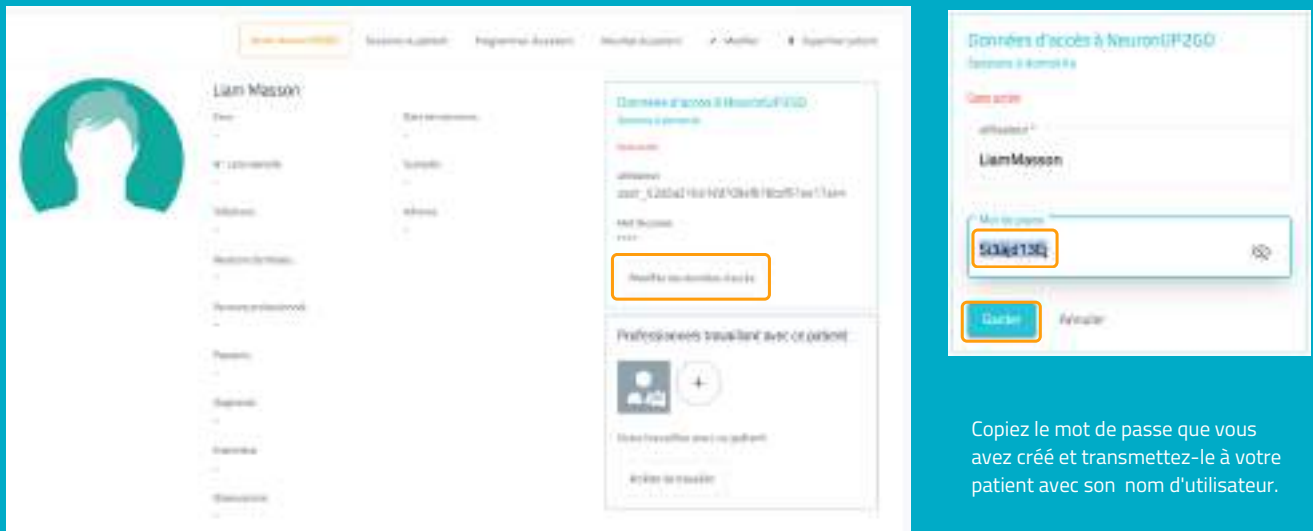

Copiez le mot de passe que vous avez créé et transmettez-le à votre patient avec son nom d'utilisateur.

3. Attribuez-lui des mois NeuroNUP2GO

"Profil patient" > "Accès NeuroNUP2GO"



Vous pouvez attribuer un ou plusieurs mois, à un ou plusieurs patients.




Vous pouvez acheter des mois supplémentaires ou attribuer des mois déjà en votre possession (17 sur l'exemple).




Votre patient a maintenant des accès à distance jusqu'au 6 septembre 2022.

4. Créez et assignez-lui une session à domicile

"Sessions numériques"

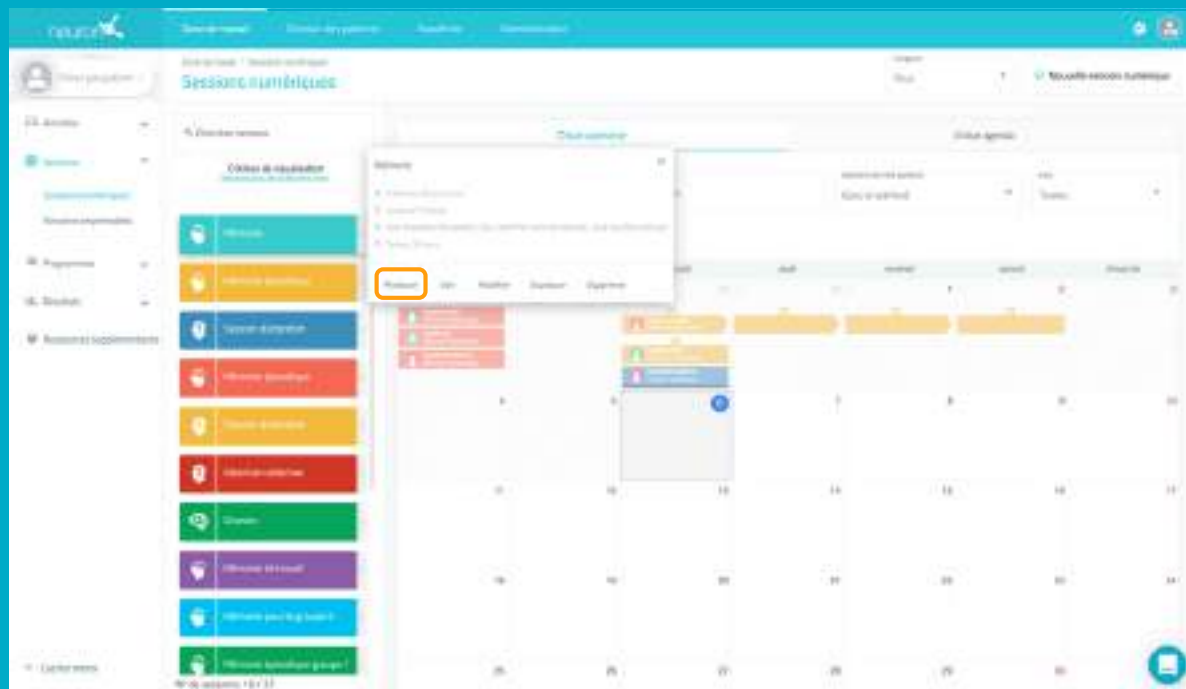


Cliquez sur "attribuer" sur la session de votre choix.

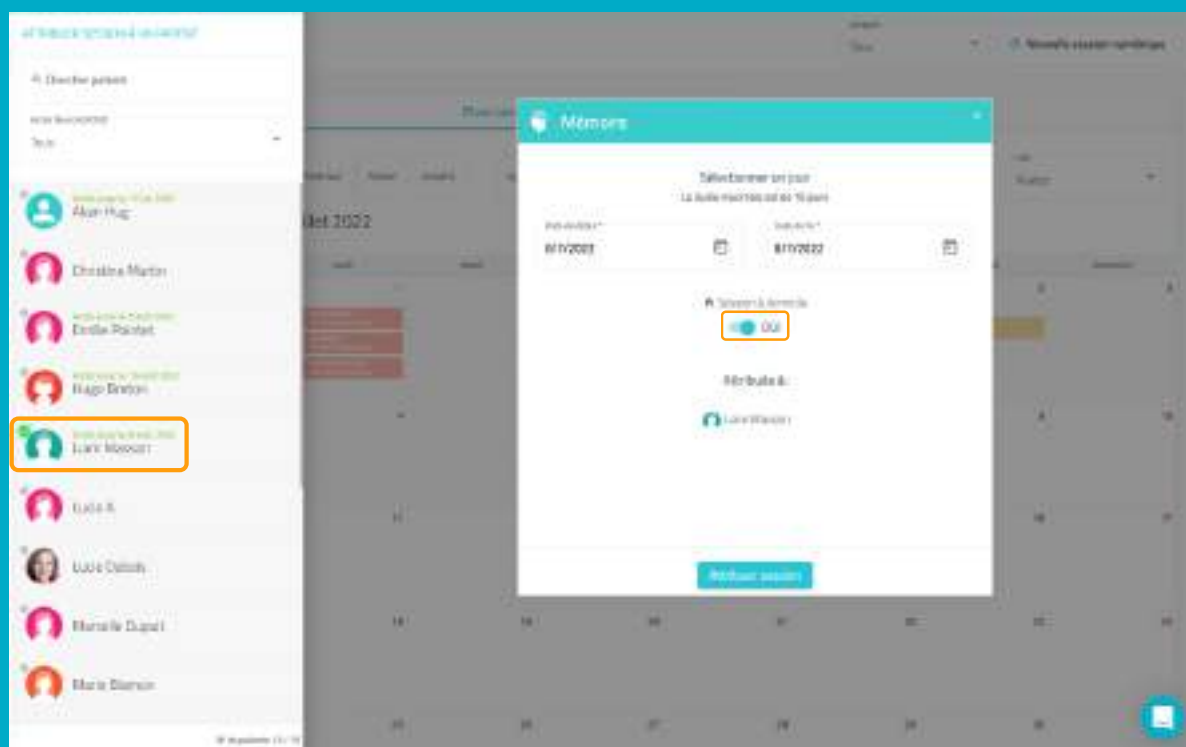

Choisissez votre patient (ayant des accès à domicile actifs).

Activez le filtre session à domicile.

5. Suivez l'avancée de la session en direct

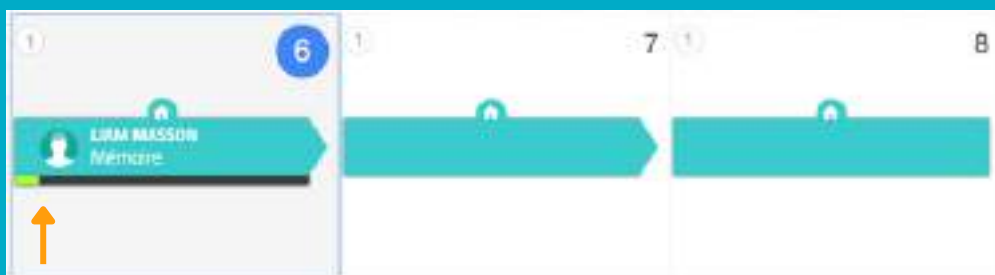

Votre patient se connecte depuis son domicile avec ses accès et vous pouvez voir son avancée grâce à la jauge.

GUIDE

TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS
PATIENTS SIMULTANÉMENT






Avec NeuronUP, vous pouvez faire travailler vos patients en même temps sur différents dispositifs.




Pour cela, vous allez devoir vous connecter successivement avec vos accès sur l'ordinateur de chaque patient et lancer la session que vous avez assigné.

1. Premièrement vous allez devoir assigner une session

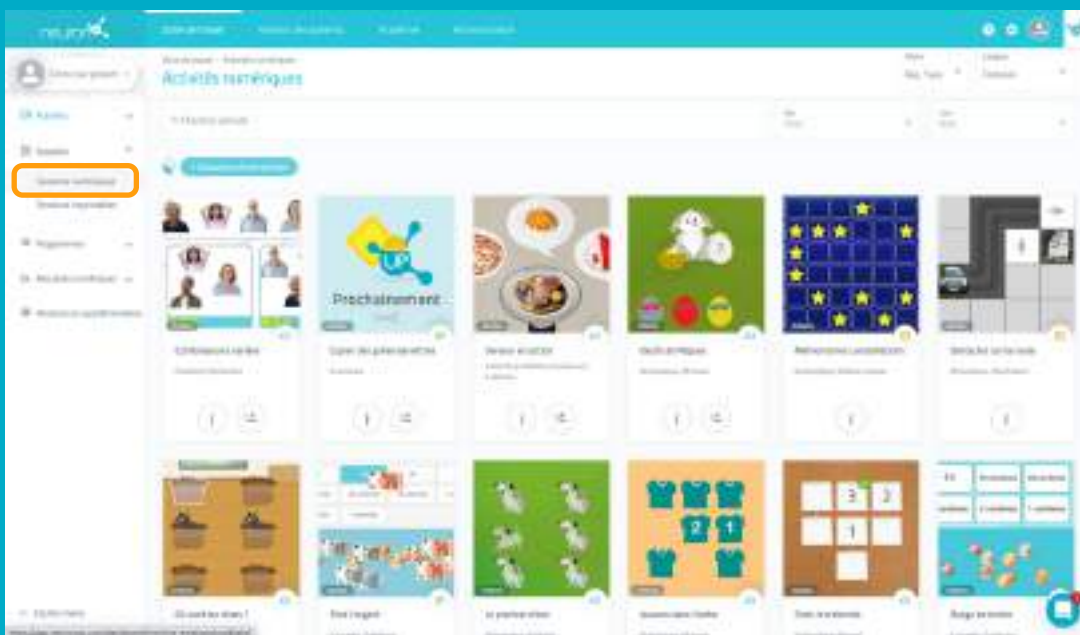


Depuis le menu, allez dans session puis sessions numériques.

2. Choisissez et cliquez sur une session pour l'attribuer

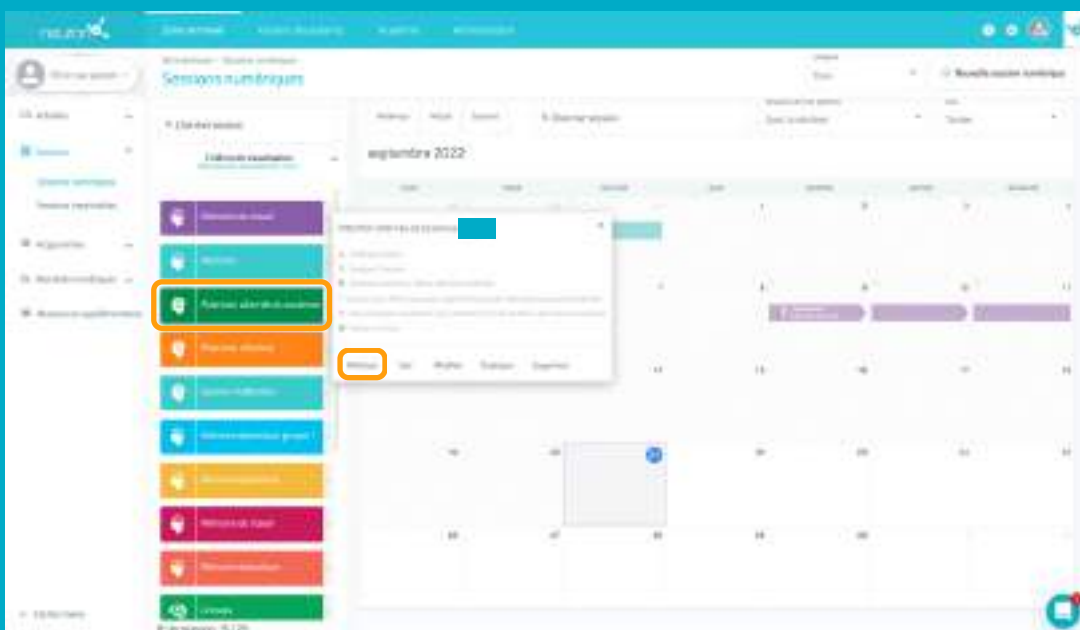

Cliquez ou faites glisser la session sur la date de début souhaitée.


3. Choisissez à quels patients attribuer la session

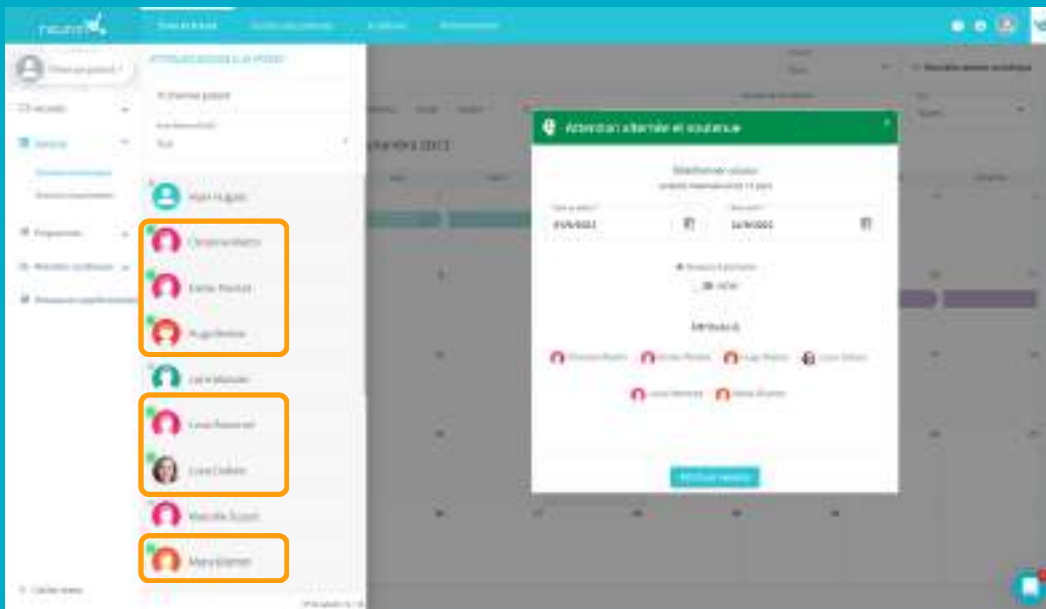

Dans la liste des patients, choisissez ceux qui vont travailler avec cette session.


Attention : pour que les patients puissent travailler individuellement en même temps, il est nécessaire que vous ayez autant de dispositif que de patients.

Par exemple : pour 6 patients qui travaillent en même temps, vous devez avoir 6 ordinateurs ou 3 ordinateurs et 3 tablettes par exemple.

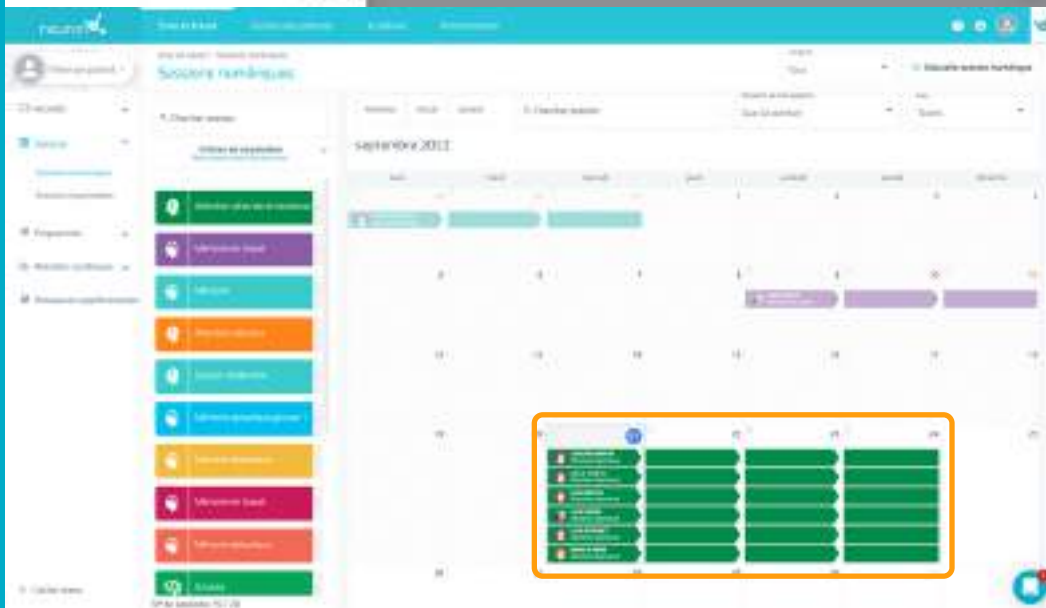


4. Allez sur le dispositif du 1° patient, connectez-vous et démarrez la session

À partir d'ici vous devrez répéter le processus sur le dispositif de chaque patient.

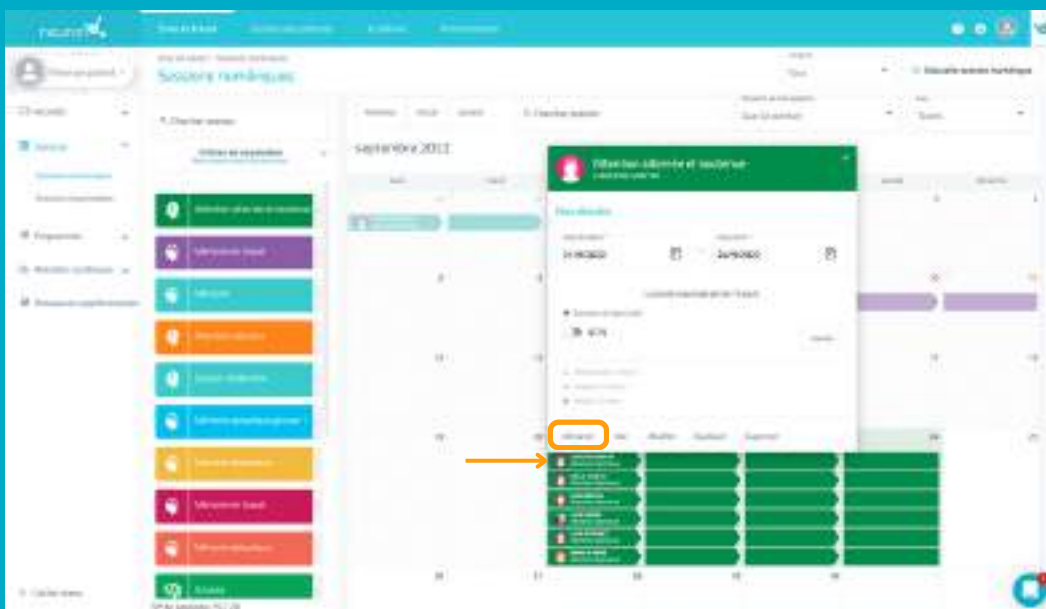

Une fois connecté sur l'ordinateur du premier patient, allez dans les sessions, sélectionnez celle du patient (ici Christine Martin) et cliquez sur démarrer.

La session du patient démarre sur son dispositif


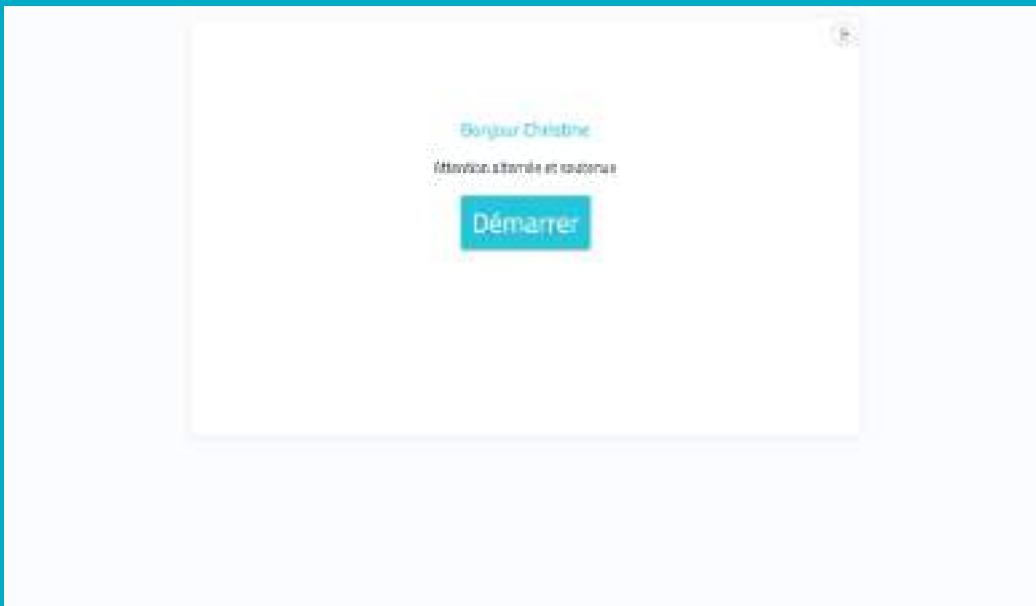


À partir d'ici, votre session est sécurisée, votre patient ne peut accéder qu'à sa session.

Il n'a qu'à cliquer sur démarrer pour commencer à travailler.




Allez maintenant sur le dispositif du patient suivant

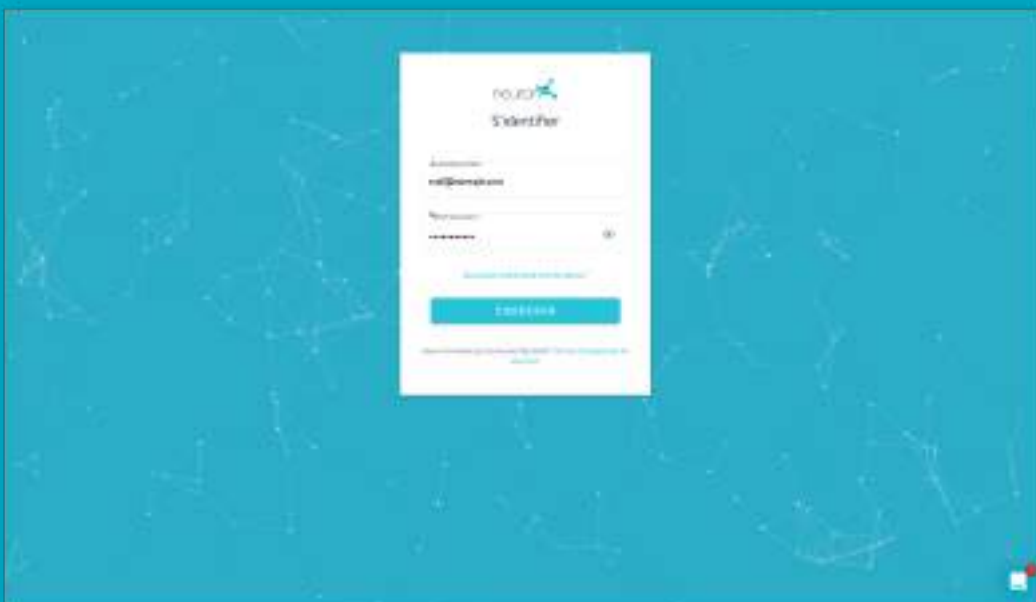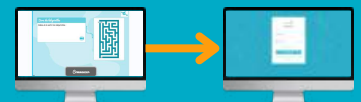


Répétez le processus précédent.


Connectez-vous avec vos identifiants sur le dispositif du 2^e patient.

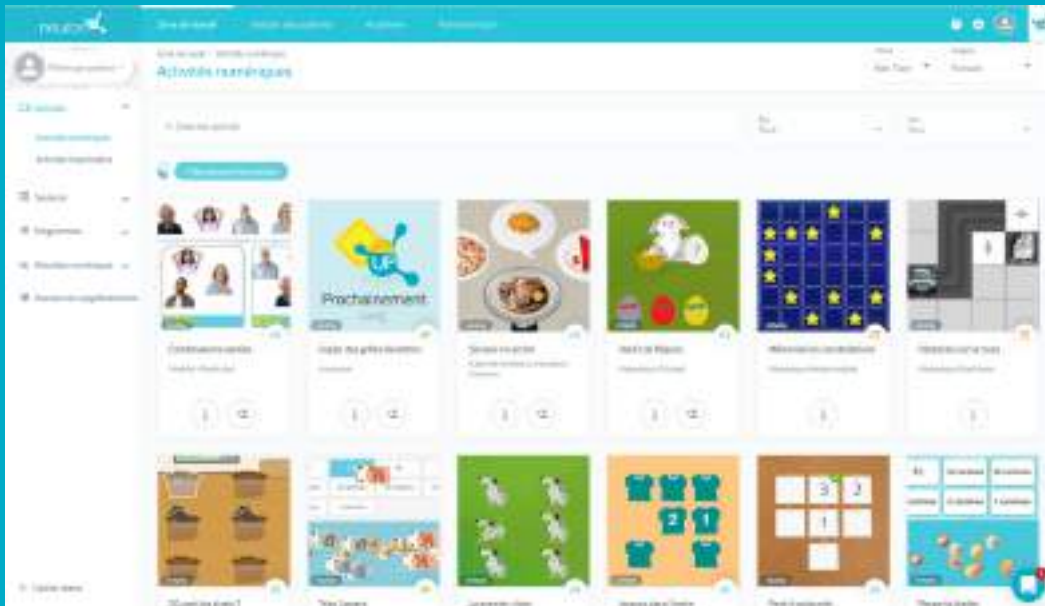

Allez dans les sessions numériques.

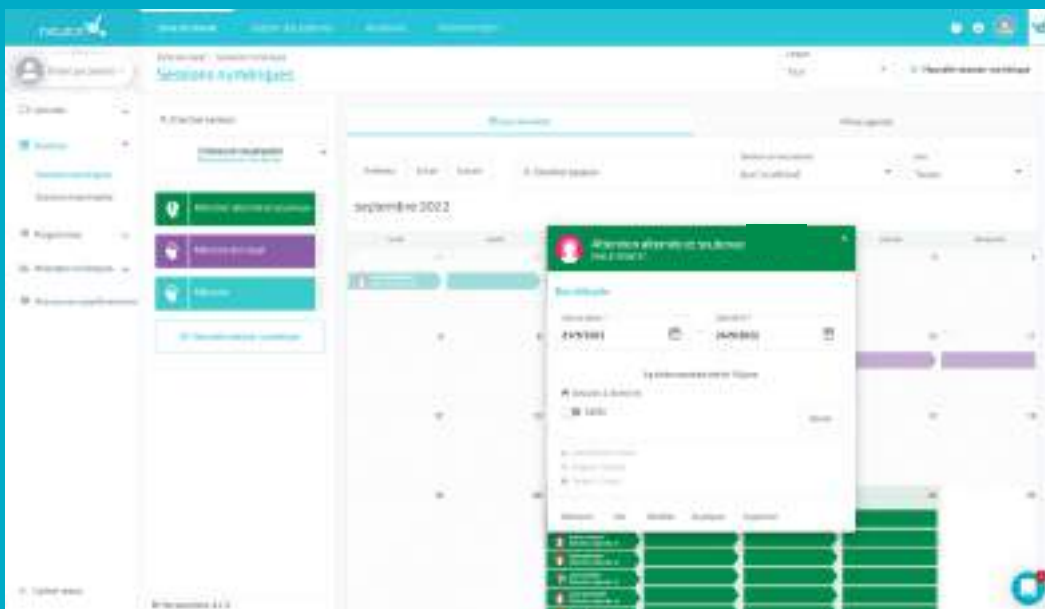

Sélectionnez la session du patient, ici "Émilie Pointet" et cliquer sur démarrer.

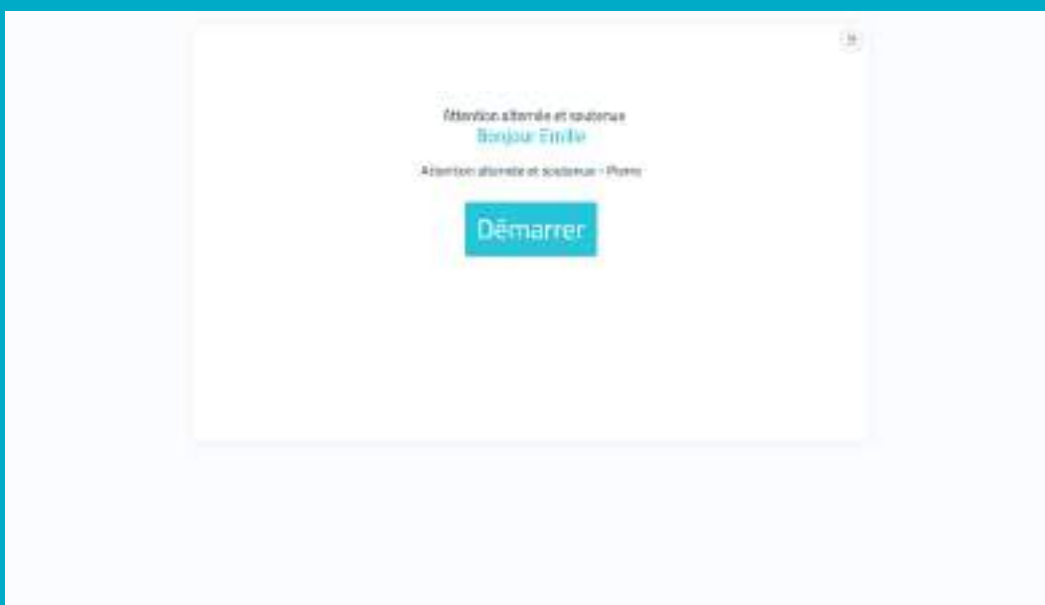

La session démarre.

Répétez le processus pour les 6 patients concernés (dans l'exemple).

GUIDE


TRAVAILLER EN GROUPE






Avec NeuronUP, vous pouvez faire travailler vos patients ensemble. Pour cela, utilisez un seul dispositif (ordinateur, tablette ou rétroprojecteur en fonction du nombre de patients).

1. Créer un profil patient pour le groupe de travail

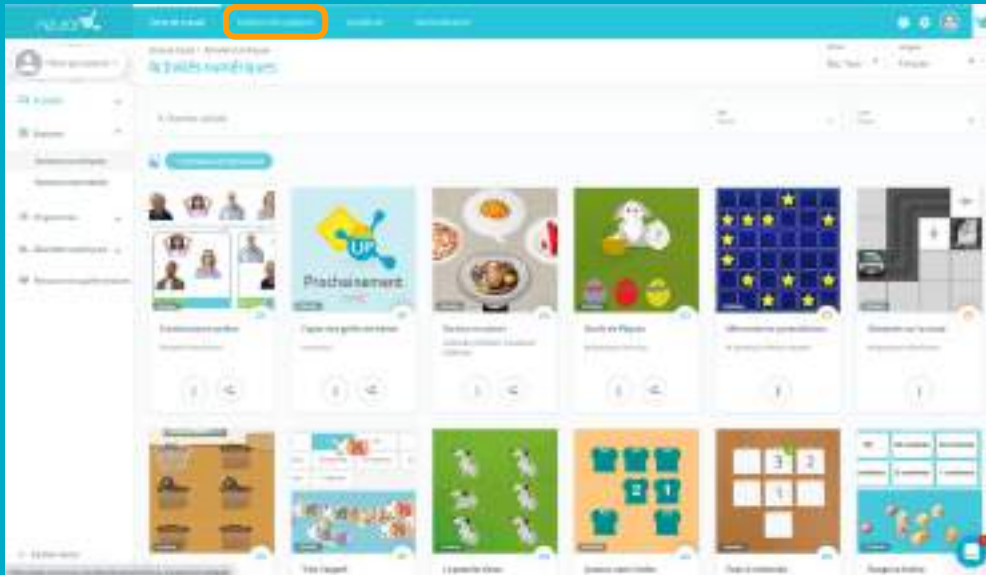

Il est important de créer un profil spécifique pour travailler en groupe, afin de ne pas fausser les résultats d'un patient lors de l'enregistrement de ces derniers.

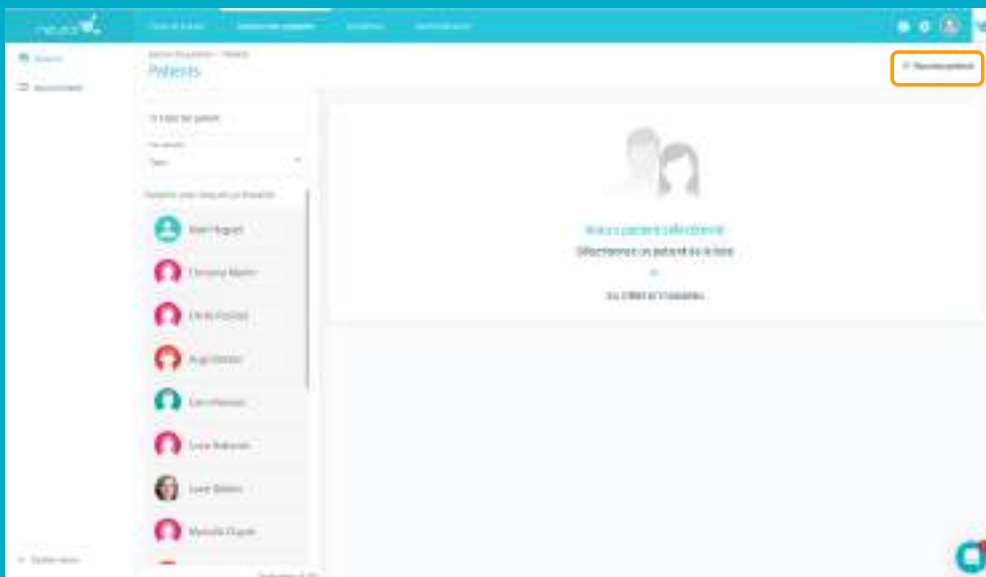


Cliquez sur "Nouveau patient" en haut à droite.


2. Remplir les informations du profil

Vous pouvez mettre le nom qui vous semble le plus approprié pour le profil de votre groupe de travail.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons mis "groupe" pour le prénom et "3" pour le nom.

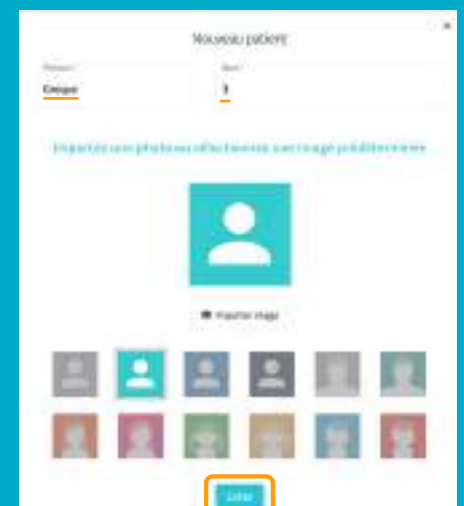


Attribuer une session au groupe de travail

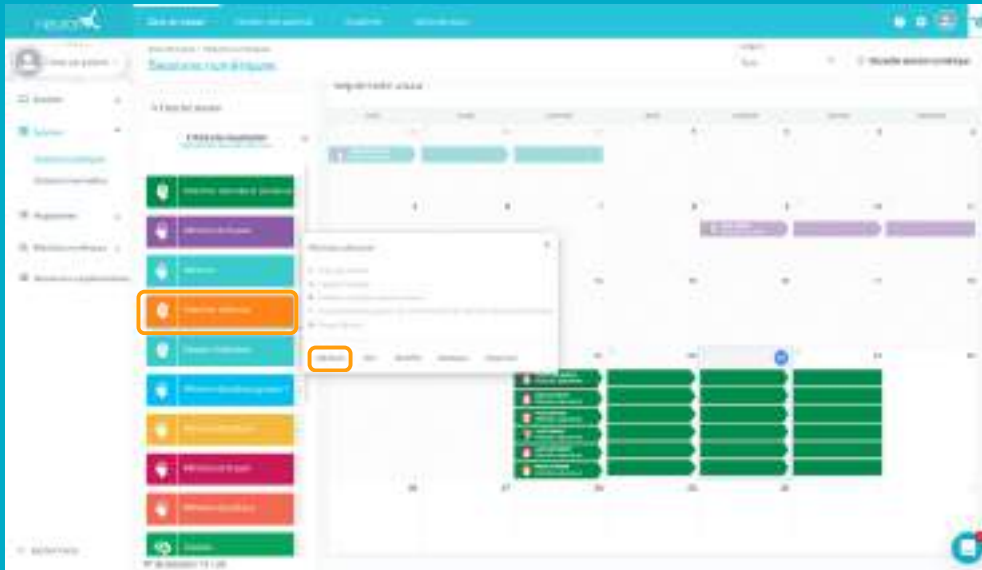


Allez dans sessions numériques.

Choisissez une session, cliquez dessus ou faites-la glisser pour l'attribuer.

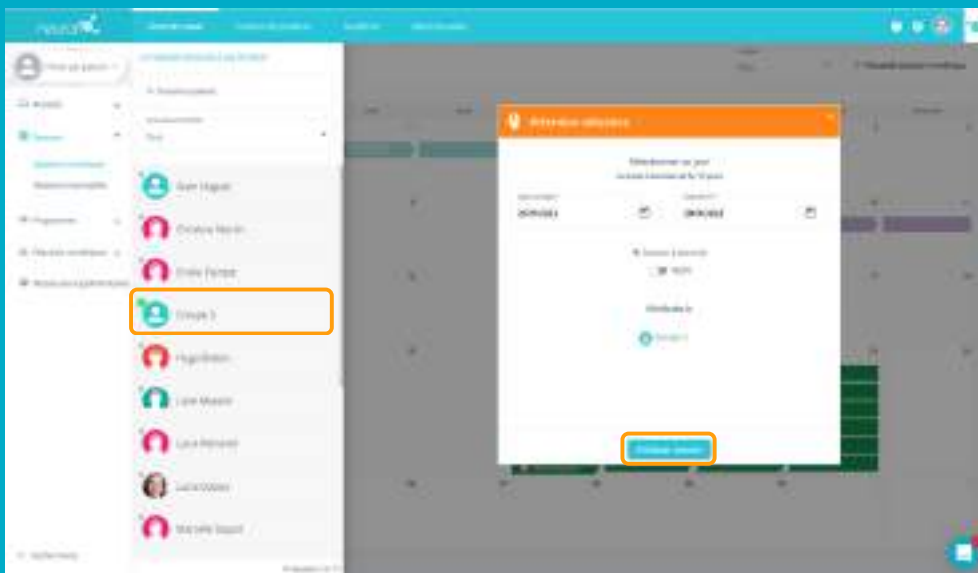

Choisissez le profil appelé "Groupe 3"

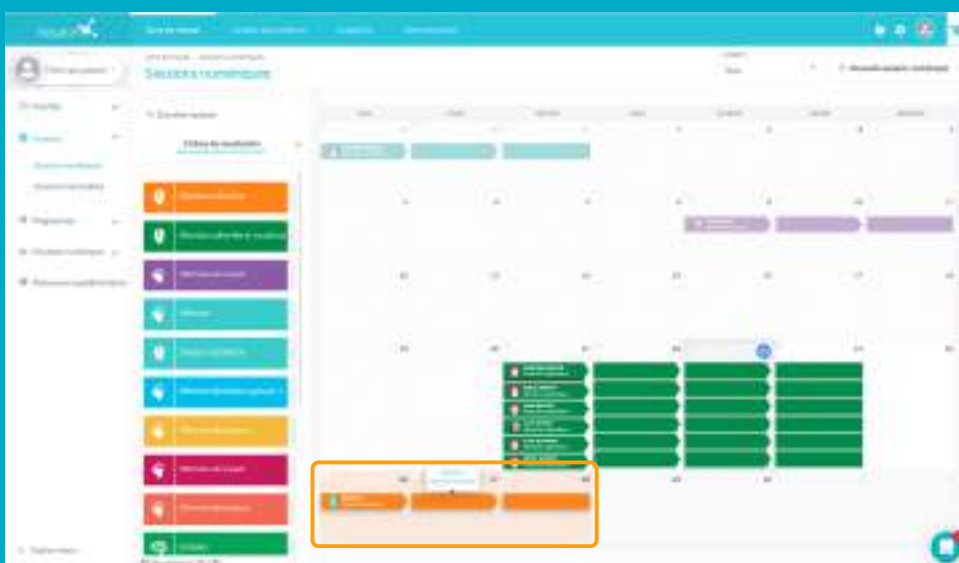

Une fois que votre dispositif de travail et vos patients sont prêts à travailler ensemble, cliquez sur la session puis sur "démarrer".